

Heraeus

KATALOG STOMATOLOGICZNY

PRODUKTY
2011/2012



ONLINE
WWW.HERAEUS-DENTAL.COM

Witamy w firmie Heraeus

Heraeus – partner w zrównoważonej praktyce dentystycznej

Jako firma rodzinna z długoletnią tradycją Heraeus pracuje w sposób podobny do gabinetów dentystycznych prowadzonych przez właścicieli. W czasach szybko zachodzących zmian uwzględniamy dłuższą perspektywę i skupiamy się na przyszłości dentystyki. Podobnie jak w Państwa przypadku, perspektywa dla nas to nie kwartał, lecz dekady, a nawet pokolenia.

Dla firmy Heraeus innowacja i zrównoważony rozwój to klucze do wieloletnich sukcesów. Jako firma technologiczna działająca na skalę globalną, wywodząca się z Hanau w Niemczech, Heraeus przyjmuje odpowiedzialność globalnie i lokalnie od pokoleń – w celu osiągnięcia dobrej pozycji gospodarczej naszej firmy oraz naszych partnerów, a także dla dobra środowiska i społeczeństwa. Od 1851 r. firma Heraeus konsekwentnie wprowadzała strategię dochodowego wzrostu poprzez siłę innowacyjności. Nasze wyroby wyróżniają się w swojej klasie pod względem technologii, niezawodności i żywotności, począwszy od niewielkiego zasilacza do stymulatorów serca, a skończywszy na reflektorze laserowym ze szkła kwarcowego, który mierzy odległość między ziemią a księżycem od czasu pierwszego lądowania na księżycu. Posiadając głębokie zrozumienie technologii materiałowej, zastosowań oraz potrzeb użytkowników, stale dążymy do poprawy ludzkiego życia. Odpowiedzialne i rozsądne korzystanie z zasobów to kolejny element naszej troski. W celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla nasza firma korzysta na skalę globalną z samochodów energooszczędnych, a fabryka w Hanau jest zasilana przez energię słoneczną. Heraeus może się również poszczycić długoletnią tradycją w służbie społecznej. Już w 1897 r. założyciel firmy Wilhelm Carl Heraeus stworzył pierwszą fundację rodzinną i zbudował w Hanau sanatorium. Firma Heraeus podtrzymuje tę tradycję w ramach różnych fundacji. Członkowie rodziny starają się rozwijać działalność dobroczynną wspierając edukację i opiekę społeczną, a także promując młodych naukowców.

Jako wieloletni partner Heraeus Dental zapewnia dentystom i laboratoriom szeroki zakres estetycznych i funkcjonalnych rozwiązań dentystycznych. Jako firma prowadzona przez właścicieli, rozumiemy to, czym Państwo kierujecie się w praktyce dentystycznej. Podobnie jak Państwo, stale poszerzamy nasze doświadczenie w zakresie materiałów i technologii, aby osiągnąć zrównoważony sukces. Heraeus utrzymuje złote standardy na rynku dentystycznym z pokolenia na pokolenie – począwszy od pierwszych pieców do topienia platyny do nowoczesnych, wytrzymałych materiałów uzupełniających, łączących i wyciskowych. Ciągłe dostosowujemy nasze wyroby do zmieniających się potrzeb dentystów i pacjentów. We współpracy z czołowymi dentystami, opracowujemy materiały i urządzenia, które stanowią odpowiedź na rosnące wymogi estetyczne, funkcjonalne i ekonomiczne. Chcąc zapewnić Państwu niezawodne rezultaty kliniczne, promujemy badania uniwersyteckie na całym świecie. Wynikiem tego są wypróbowane i przetestowane najnowocześniejsze rozwiązania do codziennej praktyki dentystycznej.


Zrównoważenie z dentystycznego punktu widzenia oznacza długotrwałe i zdrowe uzupełnienia. Heraeus umożliwia specjalistom dentystycznym tworzenie wyjątkowo naturalnie wyglądających uzupełnień, które zachowują naturalną strukturę zęba możliwie długo. Równocześnie wszyscy mamy na uwadze ekonomiczną stronę leczenia. Oferujemy technicznie zaawansowane rozwiązania, które skracają czas wykonywania opracowania oraz zwiększają skuteczność, bez kompromisów w zakresie jakości i niezawodności.

Nasze rozwiązania technologiczne są tak zróżnicowane, jak indywidualne style pracy i preferencje, a także życzenia pacjentów. Dzięki temu zapewniamy elastyczny wybór, zależnie od przypadku. Jednym z przykładów jest nasz uniwersalny nanohybrydowy materiał kompozytowy Charisma Diamond do tworzenia estetycznych uzupełnień bezpośrednich. Dentysta ma wybór pomiędzy prostym nakładaniem warstw z użyciem kolorów uniwersalnych a wymyślnym nakładaniem wielu warstw o różnym poziomie przezierności. Nieprzeziernie kolory zębiny rozszerzają Państwa możliwości tworzenia realistycznych, wytrzymałych uzupełnień, nawet w przypadku przebarwionych zębów. Na prośbę naszych klientów rozszerzyliśmy gamę wyrobów Charisma o Charisma Diamond – wysoce skuteczne rozwiązanie do naturalnie pięknych uzupełnień zębów przednich i tylnych. Nasze najwyższej klasy rozwiązania do łączenia i wyciskania pozwalają na skrócenie czasu opracowywania i osiągnięcie w każdym przypadku naukowo udowodnionej niezawodności. Z nową recepturą wszechstronny bond siódmej generacji Gluma Self Etch umożliwia jednoetapowe wytrawianie, przygotowanie powierzchni, łączenie i zabezpieczanie przed nadwrażliwością, osiągane jeszcze szybciej i wygodniej. Wspaniałe rezultaty Variotime oraz charakterystyka naszego materiału wyciskowego Flexitime zostały potwierdzone i przetestowane w ciągu dziesięciu lat użytkowania. Ten innowacyjny silikon typu A łączy w sobie wyjątkową precyzję i standardowe procedury pracy, dzięki inteligentnej koncepcji zmiennego czasu pracy. Wszystko to ma na celu osiągnięcie najlepszych rezultatów. Za pomocą nowego systemu szybkiego mieszania automatycznego Dynamix Speed można przygotować materiały Variotime dwa razy szybciej. Generalnie oszczędność czasu oraz bezproblemowe opracowywanie są korzystne dla pacjentów i sprawiają, że leczenie staje się przyjemniejsze.

Niniejszy katalog przedstawia nasz szeroki asortyment wyrobów dentystycznych – od diagnostyki po stomatologię zachowawczą.


Nasze najnowocześniejsze technologie oraz zintegrowane rozwiązania wspierają Państwa w zapewnianiu niezawodnej, zorientowanej na pacjenta opieki dentystycznej. Cokolwiek Państwo wybiorą, będziemy towarzyszyć Państwu w przyszłym sukcesie. Zawsze stosujemy się do naszej zasady przewodniej:

Państwo wybierają – my dostarczamy!

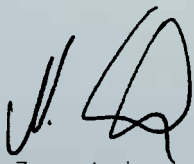

Z poważaniem
Novica Savic, Wiceprezes
Szef Działu Dentystyki



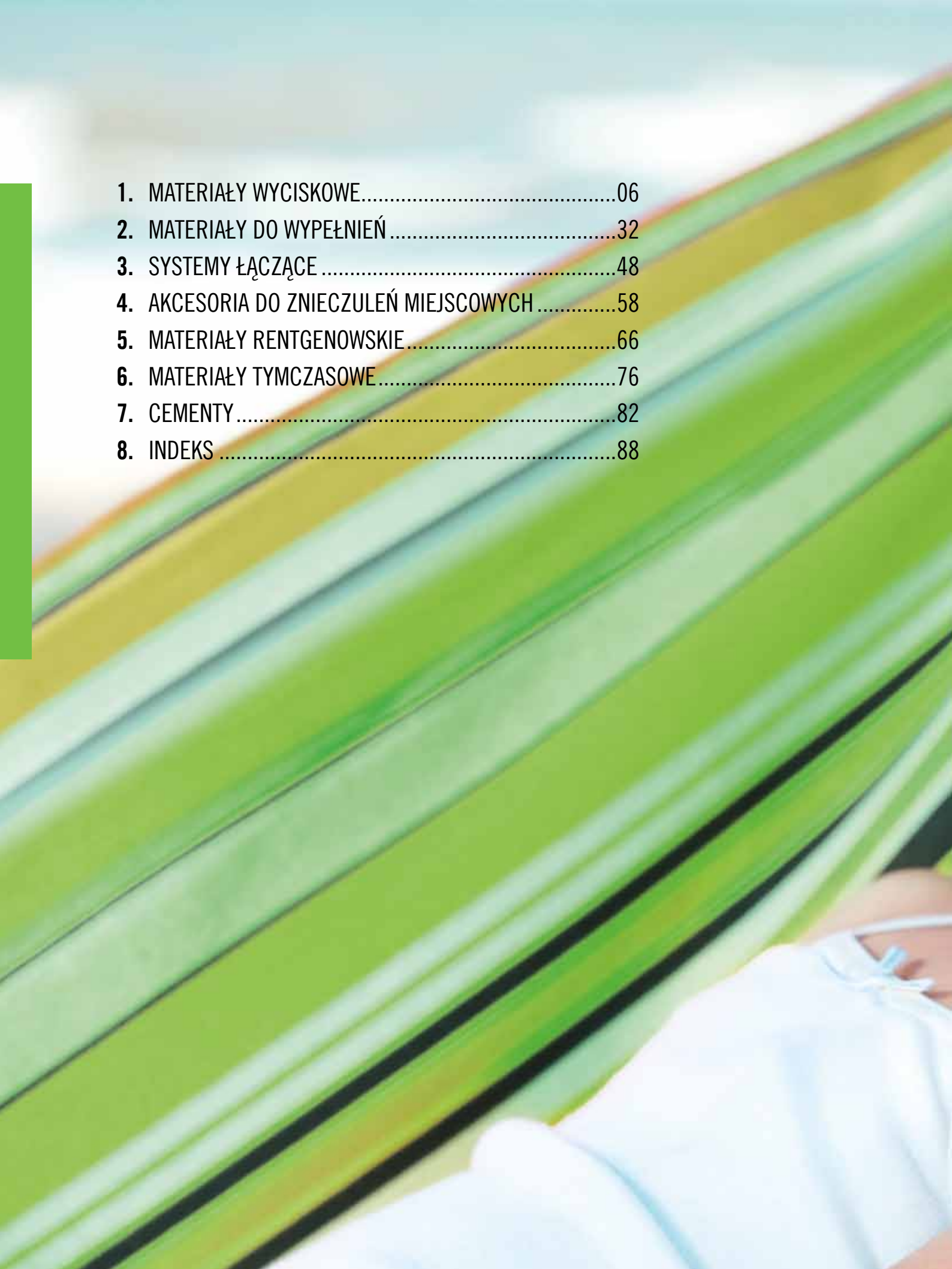

1. MATERIAŁY WYCISKOWE.....	06
2. MATERIAŁY DO WYPEŁNIEŃ	32
3. SYSTEMY ŁĄCZĄCE	48
4. AKCESORIA DO ZNIECZULEŃ MIEJSCOWYCH	58
5. MATERIAŁY RENTGENOWSKIE.....	66
6. MATERIAŁY TYMCZASOWE.....	76
7. CEMENTY.....	82
8. INDEKS	88

Heraeus



A-SILIKONY

- Variotime
- Provil

→ strona 08

URZĄDZENIE MIESZAJĄCE

- Dynamix speed

→ strona 18

C-SILIKONY

- Optosil Comfort
- Xantopren Comfort
- Optosil
- Xantopren
- Xantopren M mucosa
- Xantopren Function

→ strona 20

ALGINATOWE MASY WYCISKOWE

- Alginoplast
- Xantalgin

→ strona 26

MATERIAŁY DO REJESTRACJI ZWARCIA

- Variotime Bite
- Memoreg 2
- Memosil 2

→ strona 28

AKCESORIA

→ strona 30



VARIOTIME® — PRAWIDŁOWE WYCISKI ZA KAŻDYM RAZEM

Precyzyjny materiał wyciskowy Variotime łączy w sobie wyjątkową precyzję z możliwością dostosowania do techniki opracowywania, dzięki czemu uzyskuje się wspaniałe wyciski, będące podstawą do tworzenia precyzyjnie dopasowanych uzupełnień protetycznych.

Nowatorska koncepcja czasu wiązania zapewnia zmienny czas opracowywania od 1–2,5 minuty, w połączeniu z krótkim czasem wiązania w jamie ustnej (2,5 min). Wyrób jest dostępny w trzech różnych systemach, obejmujących system do mieszania automatycznego oraz kompaktowy system do wszystkich zastosowań o sześciu różnych stopniach gęstości, dzięki czemu opracowywanie materiału Variotime jest łatwe, skuteczne i bezpieczne.

Variotime łączy w sobie ponad 25 lat doświadczenia firmy Heraeus w dziedzinie A-silikonów oraz precyzyjnych materiałów wyciskowych.

Zastosowania

- Wyciski koron i mostów
- Wyciski wkładów i nakładów
- Wyciski implantów
- Wyciski fiksacyjne i transferowe
- Wyciski czynnościowe

Korzyści

- Precyzja i dokładność
- Procedura opracowywania, którą można dostosować do indywidualnych wymogów
- Łatwe, skuteczne i bezpieczne opracowywanie
- Zmienny czas roboczy połączony z krótkim czasem wiązania w jamie ustnej
- Ponad 25 lat doświadczenia w dziedzinie precyzyjnych materiałów wyciskowych – A-silikonów, a także skuteczność udowodniona klinicznie
- Oszczędności w zakresie przechowywania i kosztów kapitałowych
- Kompaktowy system składający się z 6 różnych konsystencji, do wszystkich technik wyciskowych oraz szerokiego zakresu zastosowań
- Dostępność w formie przeznaczonej do mieszania ręcznego, w naboju lub w zasobniku Dynamix



OPAKOWANIA UZUPEŁNIAJĄCE W KARTUSZACH DYNAMIX CARTRIDGE

Variotime Dynamix Putty Refill

Zawartość

2 x 380 ml Dynamix Putty
2 Końcówki mieszające Dynamix
1 Pierścień mocujący Dynamix

Art. nr:

6604 4995



Variotime Dynamix Heavy Tray Refill

Zawartość

2 x 380 ml Dynamix Heavy Tray
2 Końcówki mieszające Dynamix
1 Pierścień mocujący Dynamix

Art. nr:

6604 5000



Variotime Dynamix Monophase Refill

Zawartość

2 x 380 ml Dynamix Monophase
2 Końcówki mieszające Dynamix
1 Pierścień mocujący Dynamix

Art. nr:

6604 5034



1 MATERIAŁY WYCISKOWE/ A-SILIKONY

1.1 VARIOTIME®

OPAKOWANIA UZUPEŁNIAJĄCE W 50 ML NABOJACH AUTOMIX CARTRIDGE

Variotime Heavy Tray Refill

Zawartość

2 x 50 ml Heavy Tray
5 zielonych końcówek mieszających

Art. nr: 6604 4998



Variotime Light Flow Refill

Zawartość

2 x 50 ml Light Flow
10 żółtych końcówek mieszających

Art. nr: 6604 5038



Variotime Monophase Refill

Zawartość

2 x 50 ml Monophase
5 zielonych końcówek mieszających

Art. nr: 6604 5032



Variotime Extra Light Flow Refill

Zawartość

2 x 50 ml Extra Light Flow
10 żółtych końcówek mieszających

Art. nr: 6604 5040



Variotime Medium Flow Refill

Zawartość

2 x 50 ml Medium Flow
10 żółtych końcówek mieszających

Art. nr: 6604 5036



ZESTAW WPROWADZAJĄCY DO RĘCZNEGO MIESZANIA

Variotime Easy Putty + Flow Trial Kit

Zawartość

600 ml Easy Putty
(po 300 ml bazy i katalizatora)
1 x 50 ml Light Flow
5 x żółta końcówka mieszająca
5 x końcówki wewnętrzne
1 x klej uniwersalny (10 ml)

Art. nr: 6604 5044



OPAKOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO RĘCZNEGO MIESZANIA

Variotime Easy Putty Refill

Zawartość

1 x 600 ml Easy Putty
(po 300 ml bazy i katalizatora)

Art. nr: 6604 4993



Zastosowanie	Technika	Gęstość materiału wyciskowego	Rekomendowany produkt
Korony/mosty	Wyciski dwuczaskowe	Duża gęstość	Krok 1 – VarioTime Heavy Tray Krok 2 – VarioTime Extra Light Flow
		Ręczne mieszanie, duża gęstość	Krok 1 – VarioTime Putty Krok 2 – VarioTime Extra Light Flow
	Wyciski jednoczasowe z podwójnym mieszaniem	Duża gęstość	VarioTime Heavy Tray + VarioTime Medium Flow / Light Flow
	Wyciski dwuwarstwowe, korekcyjne	Ręczne mieszanie, duża gęstość	VarioTime Putty + VarioTime Medium Flow / Light Flow
	Wyciski jednoczasowe jednowarstwowe	Średnia gęstość	VarioTime Monophase
Wyciski czynnościowe	Wyciski jednoczasowe jednowarstwowe	Średnia gęstość	VarioTime Monophase
Wkłady/nakłady	Wyciski jednoczasowe z podwójnym mieszaniem		VarioTime Heavy Tray + VarioTime Medium Flow / Light Flow
	Wyciski dwuwarstwowe, korekcyjne	Ręczne mieszanie, duża gęstość	VarioTime Putty + VarioTime Medium Flow / Light Flow
	Wyciski jednoczasowe jednowarstwowe	Średnia gęstość	VarioTime Monophase
Wyciski transferowe/ do implantów	Wyciski jednoczasowe z podwójnym mieszaniem	Duża gęstość	VarioTime Heavy Tray + VarioTime Medium Flow / Light Flow
	Wyciski jednoczasowe jednowarstwowe	Średnia gęstość	VarioTime Monophase



Planujemy biorąc pod uwagę nie kwartały,
lecz dekady, a nawet pokolenia.

PROVIL® – INDYWIDUALNY WYBÓR W ZAKRESIE PRECYZJI

Modułowy system Provil novo jest wyjątkowy nie tylko ze względu na swoją dużą elastyczność i szeroki zakres zastosowań. Jego komponenty są przekonujące również ze względu na ich wspaniałą jakość, wysoki stopień wygody oraz możliwość idealnego dostosowania do indywidualnych stylów pracy. Modułowo zaprojektowany system składa się z materiałów o pięciu idealnie dopasowanych rodzajach konsystencji, które pozwalają na szybkie wiązanie lub zwykły czas wiązania, i dlatego są odpowiednie do wszystkich rodzajów wycisków i technik klinicznych.

Zastosowania

- Wyciski koron i mostów
- Wyciski wkładów i nakładów
- Wyciski implantów
- Wyciski fiksacyjne i transferowe
- Wyciski czynnościowe

Korzyści

- Niezawodna precyzja i dokładność dopasowania
- Właściwości hydrofilne zapewniające idealne płynięcie w środowisku wilgotnym
- Szeroka gama produktów dostosowana do indywidualnych wymogów
- Długotrwała stabilność wymiarowa
- Odprężenie elastyczne po deformacji
- Dostępność w formie dostosowanej do mieszania ręcznego oraz w naboju, przy czym putty jest dostępny również w zasobniku Dynamix przeznaczonym do mieszania automatycznego



OPAKOWANIA UZUPEŁNIAJĄCE W 50 ML NABOJACH AUTOMIX CARTRIDGE

Provil Novo Monophase fast set (szybkie wiązanie)

Zawartość

6 x (2 x 50 ml) Monophase fast set
6 x 6 zielonych końcówek
mieszających (1:1)

Art. nr: 6600 6470



Provil Novo Medium regular set (szybkie wiązanie)

Zawartość

6 x (2 x 50 ml) Medium regular set
6 x 6 żółtych końcówek
mieszających (1:1)

Art. nr: 6600 6469



Provil Novo Monophase regular set (zwykłe wiązanie)

Zawartość

6 x (2 x 50 ml) Monophase regular set
6 x 6 zielonych końcówek
mieszających (1:1)

Art. nr: 6600 6471



Provil Novo Light fast set (szybkie wiązanie)

Zawartość

6 x (2 x 50 ml) Light fast set
6 x 6 żółtych końcówek
mieszających (1:1)

Art. nr: 6600 6466



Provil Novo Medium fast set (szybkie wiązanie)

Zawartość

6 x (2 x 50 ml) Medium fast set
6 x 6 żółtych końcówek mieszających
(1:1)

Art. nr: 6600 6468



Provil Novo Light regular set (zwykłe wiązanie)

Zawartość

6 x (2 x 50 ml) Light regular set
6 x 6 żółtych końcówek
mieszających (1:1)

Art. nr: 6600 6467



1 MATERIAŁY WYCISKOWE/ A-SILIKONY

1.1 PROVIL®

OPAKOWANIA UZUPEŁNIAJĄCE DO RĘCZNEGO MIESZANIA

Provil Novo Putty fast set

Zawartość

4 x 900 ml Putty fast set
(po 450 ml bazy i katalizatora)

Art. nr: 6522 0717



Provil Novo Putty soft fast set

Zawartość

4 x 900 ml Putty soft fast set
(po 450 ml bazy i katalizatora)

Art. nr: 6521 0096



Provil Novo Putty regular set

Zawartość

4 x 900 ml Putty regular set
(po 450 ml bazy i katalizatora)

Art. nr: 6522 0733



Provil Novo Putty soft regular set

Zawartość

4 x 900 ml Putty soft regular set
(po 450 ml bazy i katalizatora)

Art. nr: 6521 9417



MATERIAŁY W TUBKACH

Provil Novo Monophase

Zawartość

2 x 280 ml Monophase, tuba
(po 140 ml bazy i katalizatora)

Art. nr: 6522 3058



Provil Novo Medium

Zawartość

2 x 280 ml Medium, tuba
(po 140 ml bazy i katalizatora)

Art. nr: 6520 9268



Provil Novo Light

Zawartość

2 x 280 ml Light, tuba
(po 140 ml bazy i katalizatora)

Art. nr: 6520 9225



Uwaga: Dystrybutorzy sprzedają Provil również w tubkach, puszkach lub nabojach, w pojedynczych paczkach 1 x 280 ml (tubki), 1 x 900 ml (puszki), 2 x 50 ml (naboje)!

Korony/mosty

Wkłady/nakłady

Wyciski transferowe do implantów

Wyciski czynnościowe

Variotime Większe możliwości

Variotime jest innowacyjnym A-silikonem, który gwarantuje wspaniałe rezultaty oraz zastosowanie indywidualnych procedur roboczych. Sprawdź wyjątkowe połączenie precyzji i możliwości dostosowania do poszczególnych procesów.

- Zmienna i inteligentna koncepcja czasu pozwalająca na dostosowanie czasu roboczego oraz rozpoczęcia okresu wiązania.
- Wyjątkowo precyzyjne dostosowanie oraz odtwarzanie detali dzięki dokładności wymiarowej oraz właściwościom hydrofilnym.
- Szeroki zakres zastosowań – jeden system do wszystkich technik wyciskowych.

Variotime
Prawidłowe wyciski za każdym razem

DYNAMIX® SPEED – SZYBKOŚĆ PRECYZJI PRZEZ NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU

Urządzenie mieszające Dynamix speed daje wszelkie korzyści mieszania automatycznego, a przede wszystkim oszczędność czasu ze względu na podwojoną prędkość, prostą obsługę, oraz uzyskiwaną spójną mieszaninę bez pęcherzyków powietrza. Dodatkowe funkcje ułatwiają obsługę i zwiększają bezpieczeństwo.

W przypadku każdej aplikacji mieszanie i wyciskanie materiału jest sterowane elektrycznie zgodnie z wymaganiami technika dentystycznego, co umożliwia szybkie, proste i bezpieczne napełnianie łyżki wyciskowej. Nowy funkcjonalny mieszalnik Dynamix speed jest idealnie przystosowany do wyciskania A-silikonów firmy Heraeus: Variotime i Provil. Praktyczne pojemniki oraz nowy funkcjonalny i szybki mieszalnik Dynamix Speed zostały idealnie dopasowane w tym dobrze przemyślanym systemie, który pozwala na skorzystanie ze wszystkich korzyści automatycznego mieszania materiałów wyciskowych.

Zastosowania

- Mieszalnik Dynamix speed posiada dużą moc i może służyć do mieszania wszelkiego rodzaju materiałów o różnych konsystencjach, nawet materiałów putty.
- W urządzeniu Dynamix speed można stosować kartusze nowego typu 5:1 oraz wzmocnione podłużnie torebki różnych producentów do plastikowych kartuszy wielokrotnego użycia.
- Materiały oznaczone specjalnym symbolem prędkości („gwiazdką”) mogą być mieszane ze zdwojoną szybkością

Korzyści

- Szybkie mieszanie i dozowanie materiału na łyżkę wyciskową zajmuje tylko 15 sekund
- Uzyskana mieszanina jest jednorodna i wolna od pęcherzyków powietrza
- Stała jakość mieszania niezależnie od operatora
- Dokładne dozowanie materiału wyciskowego
- 3 prędkości do wyboru – 2 do nakładania materiału na łyżki wyciskowe (Dynamix high speed, standard speed) oraz jedna do napełniania strzykawek
- Automatyczny ruch tłoków
- Automatyczny bieg wsteczny do zmiany zasobnika
- Tłok nie przesuwają się po otwarciu pokrywy
- Poziom napełnienia jest sygnalizowany diodą



AKCESORIA

URZĄDZENIE DYNAMIX SPEED

Dynamix Speed EU Standard

Zawartość

1 x Dynamix machine 230 V
1 x przewód zasilający EU
z wtyczką schuko

Art. nr: 6604 5779

Końcówki mieszające 5 x 50

Zawartość

5 x 50 Końcówki mieszające Dynamix
5 x 1 Pierścień mocujący Dynamix

Art. nr: 6603 5999



Pierścień mocujący 10 x 2

Zawartość

10 x 2 Dynamix Pierścień
mocujących

Art. nr: 6603 6078



Uchwyt do montażu na ścianie

Art. nr: 6603 3825

PRZEWÓD ZASILAJĄCY

Przewód zasilający EU 230 V

Art. nr: 6603 4592

Przewód zasilający UK 230 V

Zawartość

Brytyjska wtyczka trójbolcowa

Art. nr: 6603 4326

Przewód zasilający CH 230 V

Art. nr: 6603 4327

Przewód zasilający OZ 230 V

Zawartość

Australijska wtyczka trójbolcowa

Art. nr: 6603 4328

Przewód zasilający US 120 V

Art. nr: 6603 4593

Przewód zasilający JP 100 V

Art. nr: 6604 7091

CZĘŚCI ZAMIENNE

Część zamienna

– pokrywa NOWA

Art. nr: 6604 1021

Część zamienna

– dyski tłoka

Art. nr: 6603 2128

Część zamienna

– bezpiecznik EU 230 V

Art. nr: 6603 4329

Część zamienna

– bezpiecznik US 120 V

Art. nr: 6603 4322

Część zamienna

– bezpiecznik JP 100 V

Art. nr: 6604 7092

Część zamienna

– płytka podstawy nowa

Art. nr: 6604 7093

Część zamienna

– nóżki podstawy, 4 szt.

Art. nr: 6603 5030

Część zamienna

– stempel gumowy

Art. nr: 6603 5051

OPTOSIL® COMFORT/XANTOPREN® COMFORT – WSZYSTKIE KORZYŚCI W JEDNYM SYSTEMIE

Łatwy, bezpieczny i szybki system Optosil/Xantopren Comfort jest kolejną wersją klasycznego systemu Optosil/Xantopren. Optosil/Xantopren Comfort łączy w sobie korzyści A-silikonów i C-silikonów z korzyściami polieteru w jednym idealnie dopasowanym systemie.

Zastosowania

Optosil Comfort Putty

Materiał do łyżki wyciskowej stosowany:

- w technice dwuczasewej
- w technice dwuwarstwowej
- jako krawędź funkcjonalna w wyciskach czynnościowych

Xantopren Comfort Medium

Materiał do strzykawki stosowany:

- w dużych wyciskach
- do podścielania protez
- w technice dwuczasewej
- w technice dwuwarstwowej

Xantopren Comfort Light

Materiał do strzykawki stosowany:

- w technice dwuczasewej
- w technice dwuwarstwowej
- do podścielania protez
- do sprawdzania dopasowania

Korzyści

- Brak problemów uczuleniowych w trakcie stosowania, szczególnie w przypadku rękawiczek lateksowych i rozwiązań retrakcyjnych
- Wytrzymały po nałożeniu, również w przypadku rękawiczek lateksowych oraz nici retrakcyjnych
- Łatwe nakładanie dzięki naboju 4:1
- Największa stabilność wymiarowa nawet po 7 dniach
- Wspaniałe rezultaty – wyjątkowo oszczędny system
- Dostępny do mieszania ręcznego oraz w nabojach



OPTOSIL COMFORT OPAKOWANIA UZUPEŁNIAJĄCE DO RĘCZNEGO MIESZANIA

Optosil Comfort Putty

Zawartość

4 x 900 ml, puszki (= ok. 4 x 1 kg)

Art. nr: **6538 0532**



Optosil Comfort Putty

Zawartość

1 x 6850 ml, wiaderko
(= ok. 7.7 kg)

Art. nr: **6538 2829**

XANTOPREN COMFORT OPAKOWANIA UZUPEŁNIAJĄCE W 50 ML NABOJACH AUTOMIX CARTRIDGE

Xantopren Comfort Medium

Zawartość

3 x (2 x 50 ml) Xantopren
Comfort Medium
3 x 12 żółtych końcówek
mieszających (4:1)

Art. nr: **6600 0786**



Xantopren Comfort Light

Zawartość

3 x (2 x 50 ml) Xantopren
Comfort Light
3 x 12 żółtych końcówek
mieszających (4:1)

Art. nr: **6600 0785**



AKCESORIA

Activator Universal Plus

Zawartość

1 x 60 ml Optosil/Xantopren, pasta
(tubka)

Art. nr: **6603 7443**



Activator Universal Plus

Zawartość

1 x 25 ml Optosil/Xantopren, płyn
(butelka)

Art. nr: **6603 7445**



OPTOSIL® / XANTOPREN® – C-SILIKONY

Optosil P plus oraz Xantopren to niezawodne materiały w codziennej praktyce dentystycznej – dopasowany system klasycznego putty oraz materiałów o niewielkiej lepkości. Materiały przyjazne dla użytkownika, umożliwiające precyzyjne odtworzenie detali.

Zastosowania

Optosil P plus

- technika dwuczасowa
- technika dwuwarstwowa

Xantopren H green

- Materiał do łyżek wyciskowych o dużej lepkości, stosowany w technice podwójnego mieszania

Xantopren L blue

- Materiał do strzykawek o małej lepkości, stosowany:
- w technice dwuczасowej
- w technice podwójnego mieszania

Xantopren VL plus

- Materiał do strzykawek o bardzo małej lepkości, stosowany:
- w technice dwuczасowej

Korzyści

- Dokładne odtworzenie detali ze względu na hydrokontrolę, która zapewnia optymalną zwilżalność
- Krótki czas wiązania w jamie ustnej
- Dobra mieszalność bazy z pastą aktywującą, również ręcznie
- Dostępny w formie przeznaczonej do mieszania ręcznego



OPTOSIL DO RĘCZNEGO MIESZANIA OPAKOWANIA UZUPEŁNIAJĄCE

Optosil P plus

Zawartość

4 x 900 ml, puszki
(= ok. 4 x 1.38 kg)

Art. nr: 6561 5777



Optosil P plus

Zawartość

1 x 6850 ml, wiaderko (= ok. 10.5 kg)

Art. nr: 6561 5750

AKCESORIA

Activator Universal Plus

Zawartość

1 x 60 ml Optosil/Xantopren, pasta
(tubka)

Art. nr: 6603 7443



Activator Universal Plus

Zawartość

1 x 25 ml, Optosil/Xantopren, płyn
(butelka)

Art. nr: 6603 7445



XANTOPREN OPAKOWANIA UZUPEŁNIAJĄCE

Xantopren L blue (mała lepkość)

Zawartość

1 x 430 ml, pakiet uzupełniający,
pojemnik

Art. nr: 6587 1315



Xantopren VL plus (bardzo mała lepkość)

Zawartość

1 x 430 ml, pakiet uzupełniający,
pojemnik

Art. nr: 6587 1447



XANTOPREN TUBKI UZUPEŁNIAJĄCE

Xantopren H green (duża lepkość)

Zawartość

4 x 140 ml, tubki
w tym 2 mieszalniki

Art. nr: 6561 5785



Xantopren L blue (mała lepkość)

Zawartość

4 x 140 ml, tubki
w tym 2 mieszalniki

Art. nr: 6587 1358



Xantopren VL plus (bardzo mała lepkość)

Zawartość

4 x 140 ml, tubki
w tym 1 kubek do mieszania

Art. nr: 6587 1455



Dispenser

Zawartość

Pompka do napełniania pojemników
Xantopren 430 ml

Art. nr: 6568 5961

Uwaga: Dystrybutorzy sprzedają tubki i puszki w pojedynczych paczkach 1 x 140 ml (tubki), 1 x 900 ml (puszki)!

XANTOPREN® FUNCTION – IDEALNY SYSTEM DO WYCISKÓW CZYNNOŚCIOWYCH PRZY BEZZĘBIU.

Xantopren Function jest idealnie dopasowany do wycisków czynnościowych przy bezzębieniu. Czasy opracowywania można dobierać indywidualnie. Oba materiały mogą zostać zdezynfekowane. Są one wygodne w użyciu.

Zastosowania

Materiał wyciskowy do wycisków czynnościowych przy bezzębieniu.

- Wyciski w otwartej jamie ustnej (wyciski pasywne)
- Wyciski w zamkniętej jamie ustnej (wyciski aktywne)

Korzyści

- Specjalna konsystencja do odzwierciedlenia niewielkich ruchów mięśni
- Czasy opracowywania dobierane indywidualnie
- Neutralny zapach i smak
- Zdalny do dezynfekcji

XANTOPREN FUNCTION OPAKOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Xantopren Function

Zawartość

1 x 450 ml Xantopren function, tubka (pasta)
2 x 7 ml butelka składników utwardzacza (czerwony i żółty)
tacka dozująca,
błoczek do mieszania

Art. nr: 6603 7442



XANTOPREN FUNCTION ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY

Xantopren Function Combi Pack

Zawartość

2 x 7 ml butelka składników utwardzacza (czerwony i żółty)

Art. nr: 6603 7441



Uwaga: Dystrybutorzy sprzedają tubki w pojedynczych paczkach 1 x 140 ml!

XANTOPREN® M MUCOSA – IDEALNY SYSTEM DO WYCISKÓW CZYNNOŚCIOWYCH PRZY BEZZĘBIU.

Xantopren M mucosa został opracowany specjalnie do wycisków w przypadku wrażliwej błony śluzowej.

Zastosowania

- Średniej lepkości materiał wyciskowy do wycisków błony śluzowej

Korzyści

- Właściwości tiksotropowe, t.j. płynięcie pod naciskiem i stabilność po zwolnieniu nacisku
- Nie spływa do krtani
- Czas opracowywania można dobierać indywidualnie
- Zdalny do dezynfekcji

XANTOPREN M MUCOSA

Xantopren M Mucosa

Zawartość

4 x 140 ml tubki
2 x bloczek do mieszania

Art. nr:

6561 0503



ALGINOPLAST® / XANTALGIN® — ALGANATOWE MASY WYCISKOWE

Antyalergiczne alginiany Alginoplast i Xantalgin mogą być bezpośrednio mieszane. Spełniają one obecne wymogi denty-
stów w zakresie nowoczesnych materiałów wyciskowych. Materiały te charakteryzują się wysoką dokładnością odtworze-
nia detali, elastycznością i wytrzymałością na rozciąganie, bardzo dobrze pasują do gipsu.

Zastosowania

Wyciski sytuacyjne do:

- tworzenia modeli dokumentujących
- analizy i planowania modeli
- tworzenia modeli przeciwnych
- odlewów roboczych

Korzyści

Alginoplast

- Bezpyłowa i łatwowilzalna masa wyciskowa
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i elastyczność
- Mocna konsystencja tworząca ostre krawędzie
- Smak miętowy

Xantalgin Select

- Szybkościący alginat w formie delikatnej pasty
- Kremowa konsystencja w trakcie mieszania
- Szczególnie przyjemny dla wrażliwych pacjentów (np. dzieci)

Xantalgin Crono

- Fazy procesu są wskazywane przez zmianę koloru (niebieski/ fioletowy/ różowy/ biały)
- Stabilność do 5 dni dzięki zoptymalizowanemu mechanizmowi reakcji

ALGINOPLAST® / XANTALGIN®



ALGINOPLAST

Alginoplast Fast Set, zestaw

Zawartość

20 x (2 x 500 g) w torebce foliowej

Art. nr: **6600 2444**



Alginoplast Regular Set, zestaw

Zawartość

20 x (2 x 500 g) w torebce foliowej

Art. nr: **6601 5600**



XANTALGIN SELECT

Xantalgin Select Fast Set, zestaw

Zawartość

2 x 500 g w torebce foliowej
akcesoria do mieszania,
pudełko do przechowywania

Art. nr: **6569 2097**



Xantalgin Select Fast Set, zestaw

Zawartość

20 x (2 x 500 g) w torebce foliowej

Art. nr: **6569 2089**

XANTALGIN CRONO

Xantalgin Crono clinic pack

Zawartość

2 x 500 g w torebce foliowej
akcesoria do mieszania,
pudełko do przechowywania

Art. nr: **6600 5222**



Xantalgin zestaw

Zawartość

20 x (2 x 500 g) w torebce foliowej

Art. nr: **6600 5222**

VARIOTIME BITE® – PRAWIDŁOWE WYCISKI ZA KAŻDYM RAZEM

Jako uzupełnienie dla precyzyjnego materiału wyciskowego Variotime, Heraeus opracował materiał Variotime Bite – zdatną do skanowania masę służącą do rejestracji zwarcia.

Jako precyzyjny materiał rejestrujący zwarcie, Variotime Bite opracowuje się łatwo, skutecznie i bezpiecznie. Posiada on wygodny czas roboczy 30 sekund oraz szybki czas wiązania w jamie ustnej – tylko 30 sekund – dzięki czemu pacjenci czują się bardziej komfortowo. Przycinanie skalpelem lub szlifowanie jest proste, przy minimalnym ryzyku powstawania pęknięć. Konsystencja bitej śmietany zapewnia wytrzymałość na niekontrolowane zagryzienie.

Zastosowania

- Standardowa rejestracja zgryzu w końcowej pozycji
- Rejestracja na widelcu zgryzowym
- Podstawowy materiał do celów rejestracji z użyciem wewnątrzustnego rejestratora zwarcia
- Przygotowanie małych segmentów modeli
- Rejestracja danych cyfrowych zębów przeciwległych w technologii CAD/CAM bez użycia pudru

Korzyści

- Bardzo duża twardość końcowa – pow. 94 w skali Shore'a A
- Wyjątkowa szybkość – czas wiązania w jamie ustnej tylko 30 sekund
- Idealny do skanowania - rejestrowanie danych trójwymiarowych zębów przeciwnych w technologii CAD/CAM bez użycia pudru.
- Wyraźne tiksotropowe właściwości
- Konsystencja podobna do bitej śmietany
- Łatwo go przycinać i szlifować

OPAKOWANIA UZUPEŁNIAJĄCE VARIOTIME BITE REFILL

50 ml Automix Cartridge Refills

Zawartość

2 x 50 ml Bite
10 zielonych końcówek mieszających

Art. nr: 6604 5042



MEMOREG® 2/MEMOSIL® 2 – WIĘKSZA SATYSFAKCJA DENTYSTY, TECHNIKA I PACJENTA

Materiały do rejestracji zgryzu Memoreg 2 i Memosil 2 na bazie A-silikonu są wszechstronne i mogą być wykorzystywane w protetyce i stomatologii zachowawczej, a także w implantologii i ortodoncji. Działają one na krawędzie sieczne zębów pacjenta z mniejszą siłą i wykazują dużą twardość końcową, dzięki czemu nie ma ryzyka pęknięcia przy wyciąganiu z jamy ustnej. Automatyczny system mieszający pozwala zaoszczędzić czas i zmniejsza ryzyko niepowodzeń.

Memoreg 2 to wysoce wypełniony A-silikon w kolorze różowym do wszystkich standardowych rejestracji zgryzu, który łatwo się nakłada, nawet bezpośrednio w jamie ustnej. Memosil 2 to przezroczysty A-silikon do zastosowań specjalnych. Przezroczystość pozwala na kontrolę wizualną w przypadku ustawiania akcesoriów pomocniczych (np. kontrastu do zdjęcia rentgenowskiego). W przypadku zastosowania Memosil 2 możliwe jest utwardzanie światłem wypełnienia i materiałów mocujących.

Zastosowania

Memoreg 2

- Standardowa rejestracja zgryzu do koron i mostów
- Mocowanie rejestratora łuku twarzowego
- Kodowanie akcesoriów nośnych

Korzyści

Memoreg 2

- Dobrze kontrastujący kolor pozwala natychmiast wykryć obszary przegryzione
- Wyraźne właściwości tiksotropowe zwiększają płynięcie materiału pod naciskiem, przy czym po zwolnieniu nacisku materiał powraca do stanu stabilnego
- Twardość końcowa – 90 stopni wg skali Shore'a A
- Łatwo go wyciągnąć z jamy ustnej
- Łatwy do opracowania wiertłem, nożyczkami i skalpelem
- Przyjazny dla pacjenta, czas pozostawienia w jamie ustnej wynosi tylko 60 sekund
- Neutralny smak i zapach

Memosil 2

- Wycisk zwarcziowy do światłoutwardzalnego kompozytu na zęby tylne
- Wycisk przedni do wypełnień tymczasowych, uzupełnień i licówek
- Materiał unieruchamiający granulaty kontrastowe do zdjęć rentgenowskich w przypadku planowanych implantów
- Modele macierzy transferowej do konstrukcji sztyftów na modelu gipsowym. Sztyfty można łatwo przenieść do obszaru zębów tylnych

Memosil 2

- Łatwe i szybkie nakładanie, możliwe nakładanie w jamie ustnej
- Możliwe jest utwardzenie kompozytów poprzez materiał Memosil 2
- Nie tworzy warstwy blokującej dla kompozytowych materiałów wypełniających
- Neutralny smak i zapach
- Zdalny do dezynfekcji

MEMOREG 2

Uzupełnienia 50 ml Automix Cartridge

Zawartość

3 x (2 x 50 ml) Memoreg 2
36 x zielonych końcówek mieszających (1:1)
36 x końcówki do rejestracji zgryzu

Art. nr: 6600 4965

MEMOSIL 2

Uzupełnienia 50 ml Automix Cartridge

Zawartość

3 x (2 x 50 ml) Memosil 2
36 x zielonych końcówek mieszających (1:1)

Art. nr: 6600 4969



KLEJ

Klej uniwersalny

Zawartość

Do wszystkich A- i C-silikonów firmy Heraeus
1 x 10 ml butelka, niebieski

Art. nr: 6560 7758

PISTOLETY DOZUJĄCE
DO ZASOBNIKÓW AUTOMIX
CARTRIDGE 50 ML

Pistolet dozujący 2 (1:1/2:1)

Zawartość

Pistolet dozujący do systemu nabojów:
Variotime Heavy Tray
Variotime Monophase
Variotime Extra Light Flow
Variotime Light Flow
Variotime Medium Flow
Variotime Bite
Provil novo Monophase
Provil novo Medium
Provil novo Light
Memoreg 2
Memosil 2

Art. nr: 6600 1970



Pistolet dozujący (4:1)

Zawartość

Pistolet dozujący do systemu nabojów:
Xantopren Comfort Medium
Xantopren Comfort Light
PreVision CB

Art. nr: 6600 0781

KOŃCÓWKI MIESZAJĄCE
NABÓJ 50 ML
AUTOMIX CARTRIDGE

Zielona końcówka mieszająca (1:1)

Zawartość

48 końcówek mieszających do:
Variotime Heavy Tray
Variotime Monophase
Variotime Bite
Provil novo Monophase
Memoreg 2
Memosil 2

Art. nr: 6600 1989



Żółta końcówka mieszająca (1:1)

Zawartość

48 końcówek mieszających do:
Variotime Extra Light Flow
Variotime Light Flow
Variotime Medium Flow
Provil novo Monophase
Provil novo Medium
Provil novo Light

Art. nr: 6600 1988



Żółta końcówka mieszająca (4:1)

Zawartość

48 końcówek mieszających do:
Xantopren Comfort Medium
Xantopren Comfort Light

Art. nr: 6600 0783

WEWNĄTRZYSTNE KOŃCÓWKI
MIESZAJĄCE

Biała końcówka wewnątrzustna

Zawartość

96 końcówek do zielonych końcówek mieszających (1:1) do nakładania wewnątrzustna:
Variotime Monophase
Provil novo Monophase

Art. nr: 6568 7514



Żółta końcówka wewnątrzustna

Zawartość

96 końcówek do żółtych końcówek mieszających (1:1) do nakładania wewnątrzustnego:
Variotime Extra Light Flow
Variotime Light Flow
Variotime Medium Flow
Provil novo Medium
Provil novo Light
Xantopren Comfort Medium
Xantopren Comfort Light

Art. nr: 6600 0782



Kończówka do rejestracji zgryzu

Zawartość

96 szerokich końcówek wewnątrzustnych do:
Variotime Bite
Memoreg 2

Art. nr: 6600 0905



MATERIAŁY POMOCNE DO MIESZANIA

Końcówka mieszająca Dynamix

Zawartość

5 x 50 końcówki mieszające Dynamix
5 x 1 pierścień mocujący Dynamix

Art. nr: 6603 5999



Pierścień mocujący Dynamix

Zawartość

10 x 2 Dynamix pierścień mocujący

Art. nr: 6603 6078



Uniwersalny bloczek do miesznia

Zawartość

1 blok do miesznia DIN A5

Art. nr: 6600 4363



Szpatułka do miesznia alginatu

Zawartość

1 szpatułka do miesznia alginatu

Art. nr: 6523 4072



Kubek do miesznia Xantoprenu

Zawartość

1 kubek do miesznia

Art. nr: 6527 8223



Miska do miesznia alginatu

Zawartość

1 miska do miesznia alginatu

Art. nr: 6523 4064



STRZYKAWKI WYCISKOWE

Impression Jet

Zawartość

Przeznaczona do sterylizacji
metalowa strzykawka do precyzyjnego
nakładania materiałów wyciskowych

Art. nr: 6538 6909



Końcówki Impression Jet

Zawartość

10 plastikowych końcówek
do strzykawki Impression Jet

Art. nr: 6538 6917



Szpatułka do miesznia Xantoprenu

Zawartość

Szpatułka metalowa

Art. nr: 6528 3677



KOMPOZYTY UNIWERSALNE

→ strona 34

- Charisma Diamond
- Charisma Opal
- Charisma Opal Flow
- Charisma Flow
- Charisma

KOMPOZYTY DO UZUPEŁNIEŃ ZĘBÓW PRZEDNICH

→ strona 44

- Durafill VS

KOMPOZYTY DO UZUPEŁNIEŃ ZĘBÓW TYLNYCH


→ strona 45

- Solitaire 2

AKCESORIA

→ strona 46

- Translux Power Blue
-

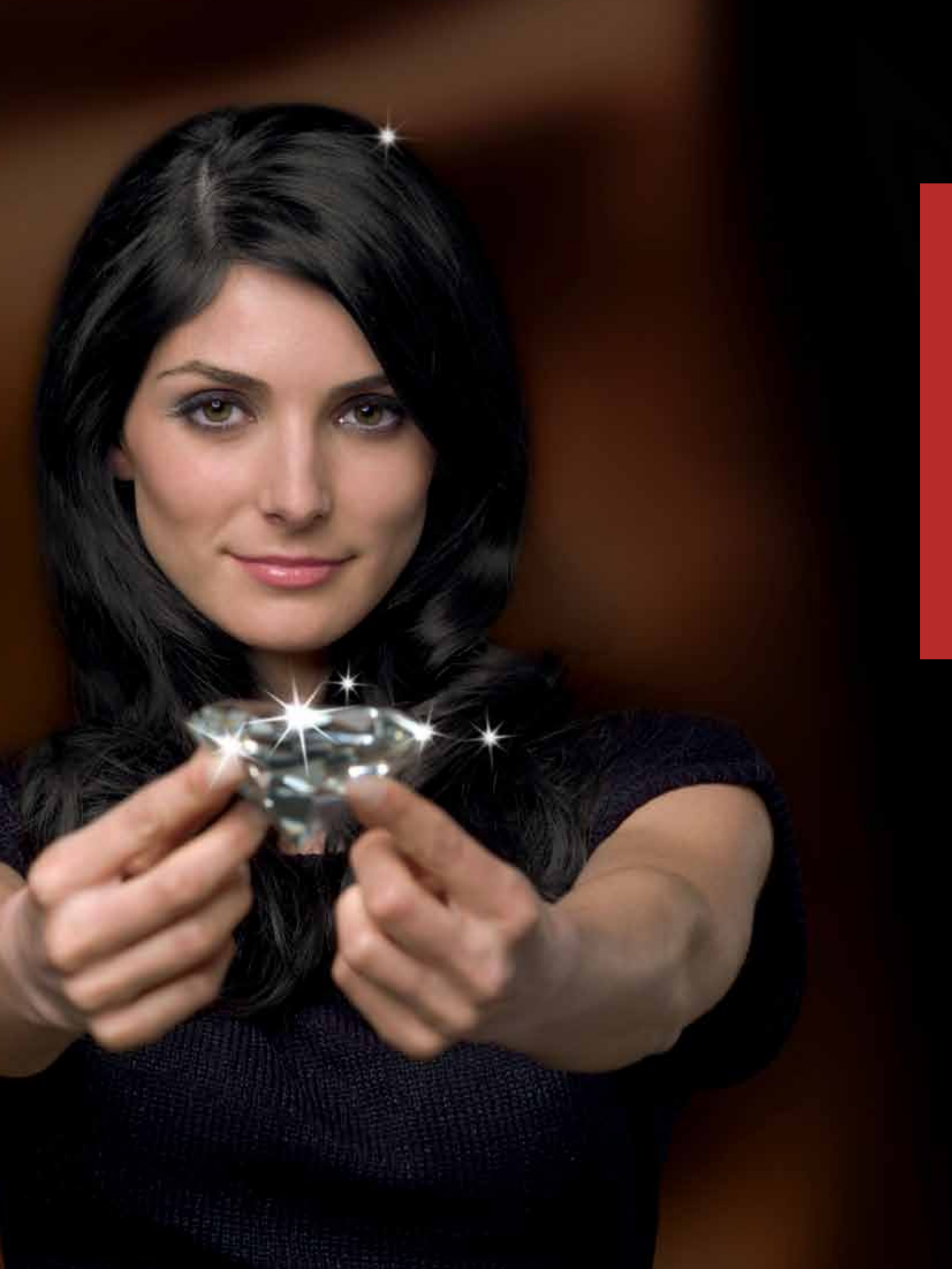

CHARISMA® DIAMOND – NOWY WYMIAR NATURALNEGO PIĘKNA

Charisma Diamond jest nowym, nanohybrydowym kompozytem uniwersalnym, który łączy niski skurcz i wysoką wytrzymałość ze wspaniałą estetyką. W przypadku mniej skomplikowanych uzupełnień, dzięki zastosowaniu tego kompozytu można uzyskać wyjątkowe rezultaty po nałożeniu jednej warstwy Charisma Diamond. Można także nakładać różne warstwy w celu uzyskania ostatecznego uzupełnienia w bardziej skomplikowanych przypadkach.

Materiał ten wyjątkowo dobrze dostosowuje się do koloru otaczającej go struktury zęba, co pozwala na uzyskanie naturalnie wyglądających rezultatów. Opatentowana macierz Charisma Diamond została oparta na specjalnym monomerze o niskiej kurczliwości. Łączy on w sobie takie cechy jak wyjątkowo duża wytrzymałość i minimalny skurcz. Duża wytrzymałość na zginanie kompozytu powoduje, że jest on odporny na nacisk w trakcie przeżuwania. Ogranicza to ryzyko powstawania pęknięć i zapewnia długotrwałość uzupełnienia. Bardzo niskie naprężenie skurczowe materiału ogranicza możliwość powstania rozwarstwienia brzeżnego, przez co chroni odbudowę przed odbarwieniem i próchnicą wtórną. Dzięki Charisma Diamond dentysta może wykonywać uzupełnienia klas I–V o każdym stopniu trudności. Materiał Charisma Diamond jest produkowany w 21 kolorach uniwersalnych, czterech nieprzeziernych kolorach zębiny oraz czterech kolorach do powierzchni siecznych.

Zastosowania

- Wypełnienia w klasach I–V wg skali Blacka
- Korekta kształtu i koloru zęba (np. likwidacja diastemy)
- Szynowanie zębów rozchwilanych z powodu kontuzji lub chorób przyzębia
- Odbudowa zębów mlecznych
- Tymczasowe naprawy uzupełnień protetycznych, ceramicznych i kompozytowych (w połączeniu z odpowiednim systemem napraw)
- Bezpośrednie licowanie kompozytowe
- Odbudowa zrębu koronowego



- Nieprzezierny kolor zębiny
- Masa sieczna - przezierna
- Kolor uniwersalny
- Masa sieczna - opalizująca

Nieprzezierny kolor zębiny		OB	OL	OM	OD	
Kolor uniwersalny		BXL	BL	A1	A2	A3
				B1		A3.5
				C2		B3
				D3		C3
Masa sieczna	przezierna					CL
						AM
	opalizująca					CO
						YO

ASORTYMENT

Charisma Diamond Intro Kit

Zawartość

3 x 4 g strzykawki w kolorach:
A2, A3, OM; Kolornik

Art. nr: 6604 3863



Charisma Diamond Basic Kit

Zawartość

6 x 4 g strzykawki w kolorach:
2 x A2, A3, A3.5, OM, OD

Art. nr: 6604 3864



Charisma Diamond Master Kit

Zawartość

10 x 4 g strzykawki w kolorach:
A2, A3, A4, A3.5, B2, C2, OM,
OD, CL, BL
1 kolornik
1 x podstawka do mieszania
2 x karta kolorów
1 x 4 ml Gluma 2Bond
2 x 2.5 ml Gluma Etch 20 Żel
1 x 50 końcówki aplikacyjne
1 x 25 kaniule
1 x tacka na modele

Art. nr: 6604 3881



Strzykawki 4 g

Kolory	Art. nr:
A1	6604 3882
A2	6604 3883
A3	6604 3884
A3.5	6604 3885
A4	6604 3886
B1	6604 3887
B2	6604 3888
B3	6604 3889
C2	6604 3890
C3	6604 3891
D3	6604 3892
OL	6604 3893
OM	6604 3894
OD	6604 3895
BL	6604 3896
BXL	6604 3897
OB	6604 3898
CL	6604 3899
AM	6604 3900
CO	6604 3901
YO	6604 3902



Kolornik

Zawartość

Kolornik

Art. nr: 6604 4554



CHARISMA® OPAL – PROSTOTA + UŻYTECZNOŚĆ = PIĘKNO

Charisma Opal jest uniwersalnym, światłoutwardzalnym kompozytem submikrohybrydowym. Technologia wypełniacza tego materiału została oparta na materiale Microglass nieprzeziernym dla promieni rentgenowskich oraz na krzemionce, która ulega silnemu zdyspersowaniu. Dzięki temu Charisma Opal nie tylko wykazuje wyraźny efekt mieniającej się barwy, lecz także wysoką nieprzezierność dla promieni rentgenowskich.

Zastosowania

- Wypełnienia w klasach I–V wg skali Blacka
- Korekta kształtu i koloru zęba (np. likwidacja diastemy)
- Szynowanie zębów rozchwilanych z powodu kontuzji lub chorób przyzębia
- Odbudowa zębów mlecznych
- Tymczasowe naprawy uzupełnień protetycznych, ceramicznych i kompozytowych (w połączeniu z odpowiednim systemem napraw)
- Bezpośrednie licowanie kompozytowe
- Odbudowa zębów koronowego

Korzyści

- Długoletnie doświadczenie w zakresie wyrobów Charisma
- Kompaktowy system kolorów, składający się z 14 kolorów do wszystkich zastosowań
- Łatwe dobieranie kolorów dzięki dwuwarstwowemu kolornikowi, wykonanemu z oryginalnego kompozytu
- Naturalny efekt fluorescencji i opalizacji oraz zoptymalizowana nieprzezierność pozwalają uzyskać naturalnie piękne uzupełnienia
- Nowa ergonomiczna strzykawka pozwalająca na łatwe rozpoznanie koloru



ASORTYMENT

Charisma Opal Basic Set Gluma Comfort Bond + Desensitizer

Zawartość

6 x 4 g strzykawki w kolorach:
A2, A3, A3.5, B2, CO, OD
1 kolornik, podstawka do mieszania,
karty obrazkowe
1 x 4 ml GLUMA Comfort Bond +
Desensitizer
2 x 2.5 ml GLUMA Etch 20 Żel,
końcówki aplikacyjne, kaniule,
błoczek do mieszania

Art. nr: **6603 8307**



Strzykawki 4 g

Kolory	Art. nr:
A1	6603 7689
A2	6603 7690
A3	6603 7702
A3.5	6603 7701
A4	6603 7703
B1	6603 7704
B2	6603 7705
B3	6603 7706
C2	6603 7688
BL (bleach)	6603 7686
OL (opaque light)	6603 7684
OM (opaque medium)	6603 7683
OD (opaque dark)	6603 7685
CO (clear opal)	6603 7687



Dwuwarstwowy kolornik

Zawartość

Kolornik

Art. nr: **6603 7881**



Charisma Opal Master Set Gluma Comfort Bond + Desensitizer

Zawartość

10 x 4 g strzykawki w kolorach:
A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, CO, OL,
OM, OD
1 kolornik, podstawka do mieszania,
karty obrazkowe
1 x 4 ml GLUMA Comfort Bond +
Desensitizer
2 x 2.5 ml GLUMA Etch 20 Żel,
końcówki aplikacyjne, kaniule,
błoczek do mieszania

Art. nr: **6603 8308**



CHARISMA® OPAL FLOW – PROSTY SPOSÓB NA ESTETYCZNE I TRWAŁE UZUPEŁNIENIA

Charisma Opal Flow to nowy, półpłynny kompozyt oparty na nanotechnologii. Pasuje on idealnie do charakterystyki chemicznej oraz gamy kolorów systemu Charisma Opal, dzięki czemu można uzyskać wysoce estetyczne rezultaty. Materiał ten ma wyjątkową właściwość dopasowywania się po polimeryzacji do koloru otaczającej go zębiny. Połączenie wypełnienia z naturalnym zębem jest niewidoczne.

7 kolorów – do naturalnych rezultatów estetycznych

Kolory uniwersalne: A1, A2, A3, A4, B2

Kolory nieprzezierne: OM (opaque medium) i podkład Baseline

Zastosowania

- Uszczelnianie zbyt dużych bruzd
- Wypełnienia ubytków – jako pierwsza warstwa dla ubytków klasy I i II
- Wypełnienia klasy V
- Minimalnie inwazyjne wypełnienia klasy I i II w miejscach, które nie są bezpośrednio narażone na działanie siły żucia
- Minimalnie inwazyjne wypełnienia klasy III
- Drobne naprawy uzupełnień bezpośrednich i pośrednich, łączonych za pomocą odpowiedniego materiału wiążącego
- Szynowanie zębów rozchwilanych

Korzyści

- Wygodna charakterystyka płynięcia (właściwości tiksotropowe)
- Bardzo duża nieprzezierność dla promieniowania rentgenowskiego
- Niskie naprężenie skurczowe i wysoka wytrzymałość na zginanie
- Bardzo dobra podatność do polerowania
- Idealne dopasowanie do materiału Charisma Opal



ASORTYMENT

Strzykawki 1.8 g

Kolory	Art. nr:
A1	6604 2162
A2	6604 2163
A3	6604 2164
A4	6604 2165
B2	6604 2166
OM (opaque medium)	6604 2167
Baseliner	6604 2168



Zestaw Charisma Opal Flow

Zawartość	
4 x 1.8 g strzykawki w kolorach: A1, A2, A3, Baseline	
Art. nr:	6604 3422



Kaniule

Zawartość	
Kaniule 100 szt.	
Art. nr:	6600 2613



Heraeus

Podobnie jak Państwo,
stale rozszerzamy nasze umiejętności w celu
osiągnięcia zrównoważonego sukcesu.



CHARISMA® FLOW – PÓŁPŁYNNY KOMPOZYT ŚWIATŁOUTWARDZALNY

Charisma Flow to półpłynny kompozyt. Pasuje on idealnie do charakterystyki chemicznej oraz gamy kolorów systemu Charisma, dzięki czemu można uzyskać wysoce estetyczne rezultaty. Materiał ten ma wyjątkową właściwość dopasowywania się po polimeryzacji do koloru otaczającej go zębiny. Połączenie wypełnienia z naturalnym zębem jest niewidoczne. Dzięki efektowi kameleona uzyskujemy najlepiej dopasowane uzupełnienia.

10 kolorów – do naturalnych rezultatów estetycznych

Kolory uniwersalne: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3

Kolory nieprzeziernie: OA2, OA4, OB2, Baseline

Zastosowania

- Uszczelnianie zbyt dużych bruzd
- Wypełnienia ubytków – jako pierwsza warstwa dla ubytków klasy I i II
- Wypełnienia klasy V
- Minimalnie inwazyjne wypełnienia klasy I i II w miejscach, które nie są bezpośrednio narażone na działanie siły żucia
- Minimalnie inwazyjne wypełnienia klasy III
- Drobne naprawy uzupełnień bezpośrednich i pośrednich, łączonych za pomocą odpowiedniego materiału wiążącego
- Szynowanie zębów rozchwilanych
- Mocowanie zamków ortodontycznych

Korzyści

- Wygodna charakterystyka płynięcia (właściwości tiksotropowe)
- Bardzo duża nieprzeziorność dla promieniowania rentgenowskiego
- Bardzo dobra podatność do polerowania
- Idealne dopasowanie do materiału Charisma
- Zauważalny efekt kameleona
- Duży wybór kolorystycznych



ASORTYMENT

Zestaw Charisma Flow

Zawartość

4 x 1.8 g strzykawki w kolorach:
A1, A2, A3, Baseline
20 x kaniule
1 x płytka mieszająca
1 x instrukcja użytkowania

Art. nr: 6601 5521



STRZYKAWKI

Strzykawki 1.8 g

Kolory	Art. nr:
A1	6601 5495
A2	6601 5496
A3	6601 5497
A3.5	6601 5498
B2	6601 5499
B3	6601 5500
OA2	6601 5501
OA4	6601 5502
OB2	6601 5503
Baseline	6601 5504



AKCESORIA

Kaniule

Zawartość

Kaniule 100 szt.

Art. nr: 6600 2613



CHARISMA® – WSZECHESTRONNY MATERIAŁ

Charisma to uniwersalny, światłoutwardzalny kompozyt składający się z drobnych cząsteczek do uzupełnień zębów przednich i tylnych. Dzięki wyraźnemu efektowi kameleona możliwe jest spełnienie wymagań pacjentów w zakresie estetycznych i długotrwałych uzupełnień. Charisma jest materiałem, którego właściwości zostały klinicznie potwierdzone. W ciągu wielu lat został on zastosowany w milionach wypełnień. Dzięki ciągle prowadzonym badaniom rozwojowym, Charisma uzyskała wyjątkowe właściwości jako wszechstronny materiał do różnych zastosowań o wyjątkowej niezawodności.

Zastosowania

- Uzupełnienia bezpośrednie ubytków klasy I–V
- Korekta kształtu i koloru zęba
- Szynowanie zębów po kontuzjach
- Odbudowa zębów mlecznych
- Likwidacja diastemy
- Korekty wad rozwojowych zębów

Korzyści

- Wyraźny efekt kameleona
- Wspaniały połysk powierzchni
- Szeroka gama kolorów
- Ścieralność zbliżona do ścieralności zębów naturalnych, maksymalna ochrona zębów przeciwległych
- Wyjątkowe dostosowanie brzeżne

ASORTYMENT

Strzykawki 4 g

Kolory	Art. nr:
A1	6600 3770
A2	6600 3771
A3	6600 3772
A3.5	6600 3773
A4	6600 6113
B1	6600 3774
B2	6600 3775
B3	6600 3776
C2	6600 3777
C3	6600 6114
C4	6600 6115
D3	6600 6116

Kolory	Art. nr:
OA2	6600 3778
OA3	6600 6118
OA3.5	6600 6119
OB2	6600 6120
I (Incisal)	6600 3779
SL (Superlight)	6600 6162
SLT (Superlight transparent)	6600 6123
SLO (Superlight Opaker)	6600 6122
YB (Yellow Brown)	6600 6124
DB (Dark Brown)	6600 6117



AKCESORIA

Narzędzie Plasmacoat

Zawartość

Nowoczesne narzędzie kompozytowe w formie szpatułki Heidemanna, ze specjalną powłoką z azotku tytanu

Art. nr: 6504 0417



ASORTYMENT

Charisma 6 x 4g/ GLUMA Comfort Bond + Desensitizer

Zawartość

6 x 4g strzykawki w kolorach:
A1, A2, A3, B1, OA2, OA3
1 kolornik
1 x podstawka do mieszania
2 x karta kolorów
1 x 4 ml Gluma Comfort Bond + Desensitizer
2 x 2.5 ml Gluma Etch 20 Żel
1 x 50 końcówki aplikacyjne
1 x 25 kaniule
1 x tacka na modele

Art. nr: 6600 3736



Charisma Combi Gluma Comfort Bond

Zawartość

8 x 4 g strzykawki w kolorach:
A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, OA2, Incisal,
1 kolornik
1 x podstawka do mieszania
2 x karta kolorów
1 x 4 ml Gluma Comfort Bond
2 x 2.5 ml Gluma Etch 20 Żel
1 x 50 końcówki aplikacyjne
1 x 25 kaniule
1 x tacka na modele

Art. nr: 6600 3737



Kolornik

Zawartość

Kolornik z 5 kolorami
SL, SLT, SLO, YB, DB

Art. nr: 6600 4007



Kolornik

Zawartość

Kolornik z 18 kolorami
Paleta 1: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3.
Paleta 2: C4, D3, OA2, OA3, OA3.5, OB2, SL, I

Art. nr: 6600 0121



DURAFILL® VS – WIECZNE PIĘKNO

Durafill VS to sprawdzony, światłoutwardzalny kompozyt z mikrowypełniaczem, służący do tworzenia estetycznych uzupełnień zębów przednich. Durafill VS jest z powodzeniem stosowany w praktyce dentystycznej od ponad 20 lat. Materiał ten wyróżnia się ze względu na jego wyjątkowo żywe kolory i połysk. Przyjazne właściwości w zakresie opracowywania oraz przekonujące rezultaty kosmetyczne i funkcjonalne materiału Durafill VS są wysoce cenione przez dentystów i pacjentów.

Zastosowanie

- Uzupełnienia bezpośrednie klas III–V

Korzyści

- Wyjątkowo żywe kolory, naturalne odbicie światła i połysk
- Idealne dopasowanie koloru do otaczającej materiał struktury zęba po polimeryzacji
- Bezpieczny i szybki wybór kolorów (kolornik z oryginalnego kompozytu)
- Materiał łatwy do modelowania, szczególnie w przypadku uzupełnień krawędzi siecznej, dzięki wyjątkowej miękkiej konsystencji
- Delikatny połysk powierzchni dzięki idealnej przydatności do polerowania
- Uzupełnienia z kompozytu Durafill VS wykazują wyjątkową trwałość koloru i kształtu



AKCESORIA

Kolornik

Zawartość	
Kolornik z 19 kolorami: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C4, D3, OA2, OA3, OA3.5, OB2, SL, I	
Art. nr:	6600 0046

UZUPEŁNIENIA

Strzykawki 4 g

Kolory	Art. nr:
A1	6600 0008
A2	6600 0009
A3	6600 0010
A3.5	6600 0011
A4	6600 0012
B1	6600 0013
B2	6600 0014
B3	6600 0015
C1	6600 0016
C2	6600 0017
C3	6600 0018
C4	6600 0019

Kolory	Art. nr:
D3	6600 0020
OA2	6600 0021
OA3	6600 0022
OA3.5	6600 0023
SL (Super light)	6600 0025
SLO (Superlight Opaker)	6600 2498
SSL (Super Snow Light)	6600 2499
I (Incisal)	6600 0026

SOLITAIRE® 2 – SZCZELNE WYPEŁNIENIA

Solitaire 2 to światłoutwardzalny kompozyt z poli-szkła tworzący szczelne wypełnienia, uwalniający fluorek, nieprzezierny dla promieniowania rentgenowskiego. Służy on do uzupełnień zębów tylnych. Bezpośrednie nakładanie staje się coraz powszechniejsze we współczesnej praktyce dentystycznej jako alternatywa skomplikowanych uzupełnień pośrednich. Od 1997 r. Solitaire z powodzeniem udowodnił, że zdolność tworzenia szczelnych wypełnień jest podstawową korzyścią w przypadku wykonywania uzupełnień zębów tylnych. Solitaire 2 to poprawiona wersja tego materiału o istotnie zoptymalizowanych najważniejszych właściwościach.

Zastosowania

- Uzupełnienia w klasach I i II
- Uzupełnienia klasy V
- Szynowanie zębów rozchwilanych z powodu kontuzji
- Odbudowa zębów mlecznych
- Odbudowa zrębu koronowego

Korzyści

- Długotrwałe i niezawodne dopasowanie brzeżne
- Materiał wyjątkowo odporny na siłę żucia, wspaniała wytrzymałość na ścieranie
- Wyjątkowe, całkowite wypełnienie
- Materiał elastyczny o stałej konsystencji
- Wyjątkowa zdolność do modelowania – nie przywiera do narzędzi
- Wyjątkowe łatwe odtwarzanie punktu styku z zębami naprzeciwległymi



SOLITAIRE® 2

UZUPEŁNIENIA


4 g Strzykawki

Kolory	Art. nr:
A1	6600 1633
A2	6600 1634
A3	6600 1635
A3.5	6600 1636
A4	6600 1637
B2	6600 1638
B3	6600 1639
C3	6600 1641
I (Incisal)	6600 1642

AKCESORIA

Instrument

Zawartość	
Narzędzie do wypełniania z powłoką nieprzywierającą, przeznaczone szczególnie do wypełnień zębów tylnych	
Art. nr:	6600 1656

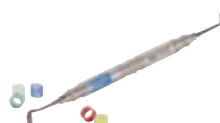

TRANSLUX® POWER BLUE® — SPÓJRZ NA TO W INNYM ŚWIETLE!

Translux Power Blue to bezprzewodowa lampa 5W-LED o dużej mocy z wąskim spektrum emisji, które jest dokładnie dopasowane do spektrum absorpcji fotoinicjatora – kamforochinonu. Światło wydzielane przez Translux Power Blue jest dzięki temu praktycznie w całości wykorzystane do aktywacji kamforochinonu. Oznacza to, że lampa Translux Power Blue pozwala na uzyskanie wyjątkowych rezultatów polimeryzacji, przy zastosowaniu wyraźnie mniejszej ilości ciepła.

Zastosowanie

- Polimeryzacja światłoutwardzalnych materiałów do uzupełnień: kompozytów, cementów uszczelniających, systemów łączących, uszczelniaczy

Korzyści

- Bezwyśiolkowa obsługa dzięki szczególnie lekkiej rękojeści (ważącej ok. 143 g)
- Łatwa obsługa dzięki ergonomicznej rękojeści i jednemu, wygodnemu przyciskowi do sterowania
- Wygoda ruchu dzięki bezprzewodowej rękojeści i osobnej stacji ładującej
- Wytrzymałe baterie i szybkie ładowanie dzięki nowoczesnej, sterowanej procesorem stacji ładującej
- Brak wentylatora – ciche działanie
- Dwa tryby naświetlania: tryb szybki (10 s) i stopniowy wzrost temperatury (wolny start, 20 s)
- Wydajność baterii: 360 cykli po 10 sekund
- Diody o dużej mocy (do 1000 mW/cm²)



ASORTYMENT

Translux Power Blue

Zawartość

Diodowa lampa polimeryzacyjna wyposażona w baterię litową, stację ładującą, światłowód, filtr ochronny i kabel zasilający

Art. nr: 6601 5574

Translux Power Blue Twin Pack

Zawartość

2 x Diodowa lampa polimeryzacyjna wyposażona w baterię litową, stację ładującą, światłowód, filtr ochronny i kabel zasilający

Art. nr: 6601 7647

CZĘŚCI ZAMIENNE

Ochronnik

Zawartość

1 filtr ochronny (średnica 8 mm)

Art. nr: 6601 6454

Ochronnik

Zawartość

1 filtr ochronny

Art. nr: 6601 6455

NOTATKI

NOTATKI

SYSTEMY ŁĄCZĄCE

→ strona 50

- GLUMA Self Etch
- GLUMA 2Bond
- GLUMA Comfort Bond
- GLUMA Comfort Bond + Desensitizer

WYTRAWIACZE


→ strona 56

- GLUMA Etch

MATERIAŁ DO ZNOSZENIA NADWRAŻLIWOŚCI

→ strona 57

- GLUMA Desensitizer
-

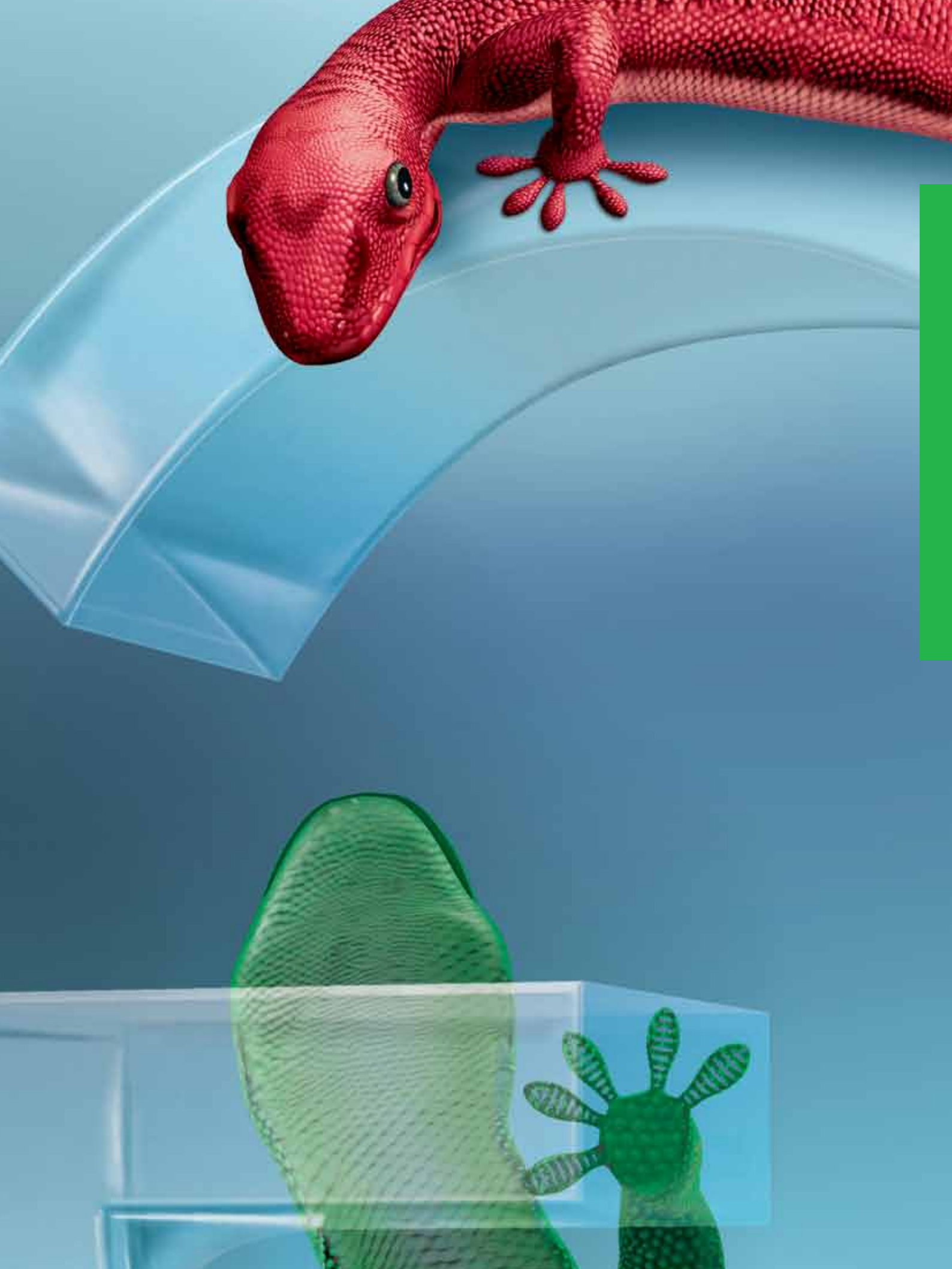

GLUMA® SELF ETCH – O JEDEN KROK DO PRZODU

Nowy, innowacyjny samotrawiący bond siódmej generacji jest bezpiecznym, niezawodnym i wygodnym środkiem wiążącym, którego niezawodność została udowodniona klinicznie. Jest on łatwy w użyciu. Jednoetapowy bond GLUMA Self Etch łączy w sobie dużą siłę wiązania, klinicznie niezawodne uzupełnienie oraz efekt zabezpieczający przed nadwrażliwością pozabiegową.

Jest to światłoutwardzalny bond, służący do wytrawiania, przygotowania podłoża i wiązania we wszystkich rodzajach uzupełnień.

Zastosowania

- Wiązanie bezpośrednich uzupełnień kompozytowych
- Wiązanie pośrednich uzupełnień kompozytowych
- Leczenie nadwrażliwości powierzchni zębów

Korzyści

- Minimalnie krótki czas przygotowania
- GLUMA Self Etch działa natychmiastowo
- Minimum niepowodzeń
- GLUMA Self Etch pozwala na maksymalne uniknięcie błędów aplikacyjnych, nawet w przypadku ruchliwych pacjentów
- Minimalna wrażliwość
- Ze względu na skład chemiczny GLUMA Self Etch może być stosowany w miejscach nadwrażliwych



UZUPEŁNIENIE

Butelka

Zawartość

Butelka 1 x 4 ml
50 końcówek aplikacyjnych
Błoczek do mieszania

Art. nr: 6604 6246



ZESTAW

Value Pack

Zawartość

Butelka 3 x 4 ml
Karta techniczna

Art. nr: 6604 6247



GLUMA® 2BOND – NOWY DWUETAPOWY SYSTEM ŁĄCZĄCY W JEDNEJ BUTELCE

Nowy system łączący piątej generacji jest oparty na nowoczesnych nanowypełniaczach. GLUMA 2Bond zapewnia idealną przyczepność do szkliwa i zębiny, a także optymalne uszczelnienie brzeżne. Ponadto GLUMA 2Bond zawiera sprawdzony środek znieczulający GLUMA – dialdehyd glutarowy. GLUMA 2Bond jest idealny dla pacjentów wrażliwych.

Zastosowania

- Wiązanie bezpośrednich uzupełnień kompozytowych
- Wiązanie pośrednich uzupełnień kompozytowych
- Leczenie nadwrażliwych powierzchni zębów

Korzyści

- Większą skuteczność
Dzięki specjalnej recepturze GLUMA 2Bond wymaga nałożenia tylko jednej warstwy w celu przygotowania powierzchni, łączenia i zabezpieczenia przed nadwrażliwością.
- Większe bezpieczeństwo
GLUMA 2Bond zapewnia idealną wytrzymałość łączenia i uszczelnienie brzeżne, dzięki nowatorskiej charakterystyce chemicznej opartej na nanowypełniaczach.
- Mniej podrażnień
Środek zabezpieczający przed nadwrażliwością, znajdujący się w składzie GLUMA, zmniejsza nadwrażliwość pozabiegową po opracowaniu lub uzupełnieniu zęba.



GLUMA® 2BOND

ASORTYMENT

Gluma 2Bond Asortyment

Zawartość

Butelka 1 x 4 ml
50 końcówek aplikacyjnych
Błoczek do mieszania
Karta obrazkowa
Strzykawki 2 x 2.5 ml GLUMA
Etch 20 Żel
25 kaniuli

Art. nr: 6604 0973



UZUPEŁNIENIE

Gluma 2Bond Refill

Zawartość

Butelka 1 x 4 ml
50 końcówek aplikacyjnych
Błoczek do mieszania
Karta obrazkowa

Art. nr: 6604 0972



Gluma 2Bond Value Pack

Zawartość

Butelka 3 x 4 ml
Karta obrazkowa

Art. nr: 6604 0971





Zrównoważenie –
z dentystycznego punktu widzenia –
oznacza długotrwałe i zdrowe uzupełnienia.

GLUMA® COMFORT® BOND – KOMFORTOWE ROZWIĄZANIE

GLUMA Comfort Bond jest światłoutwardzalnym, jednoskładnikowym bondem (na bazie etanolu) do wszystkich uzupełnień bezpośrednich i pośrednich. Można go zakwalifikować do systemów „wiążących na mokro”. Ze względu na zintegrowany środek poprawiający wiązanie 4-META oraz hydroaktywne właściwości zwilżania, GLUMA Comfort Bond zapewnia długotrwałe wiązanie pomiędzy zębem a uzupełnieniem, nawet w przypadku uzupełnień amalgamatowych. Łatwo się go dozuje z plastikowej butelki i łatwo się opracowuje. GLUMA Comfort Bond jest zarówno wygodny jak i bezpieczny w użyciu.

Zastosowania

- Wiązanie bezpośrednich uzupełnień kompozytowych i kompomerowych
- Wiązanie uzupełnień pośrednich z kompozytu, poliskła i ceramiki
- Wiązanie świeżej masy amalgamatowej

Korzyści

- Bond wytrawiający w jednej butelce, przeznaczony do gruntowania powierzchni i wiązania
- Łatwe nakładanie bez mieszania
- Nadaje się do technik wiązania na sucho i na mokro

ASORTYMENT

GLUMA Comfort Bond Butelka Asortyment

Zawartość

Butelka 1 x 4 ml (plastikowa)
Gluma Comfort Bond,
Strzykawki 2 x 2.5 ml
Gluma Etch 20 Żel
1 x 50 końcówek aplikacyjnych
1 x 25 kaniuli
1 x tacka na modele
1 x robocza karta kolorów

Art. nr: **6600 3763**

UZUPEŁNIENIE

GLUMA Comfort Bond Butelka Refill

Zawartość

Butelka 1 x 4 ml (plastikowa)
1 x robocza karta kolorów

Art. nr: **6600 3762**



GLUMA® COMFORT® BOND + DESENSITIZER – „3 W 1”

GLUMA Comfort Bond + Desensitizer to nowatorskie połączenie jednoskładnikowego bondu GLUMA Comfort Bond oraz środka znoszącego nadwrażliwość GLUMA Desensitizer. Gruntowanie powierzchni i wiązanie, a także zapobieganie pooperacyjnej nadwrażliwości można osiągnąć w jednym kroku. Dzięki swoim właściwościom system wiążący na mokro kompensuje różnice nawilżenia powierzchni zębiny. Umożliwia to regenerację kolagenowej tkanki włóknistej. Skład na bazie wody i etanolu gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa dla użytkownika.

Zastosowania

- Wiązanie bezpośrednich uzupełnień kompozytowych i kompomerowych
- Wiązanie uzupełnień pośrednich z kompozytu, poliszklą i ceramiki
- Wiązanie świeżej masy amalgamatowej
- Leczenie nadwrażliwych powierzchni zęba

■

Korzyści

- System wytrawiający w jednej butelce, przeznaczony do gruntowania powierzchni, wiązania i znieczulania
- Łatwe nakładanie bez mieszania
- Nadaje się do technik wiązania na sucho i na mokro
- Zapobieganie nadwrażliwości pozabiegowej

UZUPEŁNIENIE

GLUMA Comfort Bond + Desensitizer

Zawartość

Butelka 1 x 4 ml (plastikowa)
1 x robocza karta kolorów

Art. nr: 6602 1368



GLUMA® ETCH – NIEZAWODNE WYTRAWIANIE

GLUMA Etch Gel (żel) oraz GLUMA Etch Fluid (płyn) to środki wytrawiające na bazie kwasu ortofosforowego. Są one stosowane do wytrawiania szkliwa oraz gruntowania zębiny w przypadku uzupełnień klejonych.

Zastosowania

Wytrawianie szkliwa oraz zębiny i szkliwa w technice całkowitego wytrawiania powierzchni przed nałożeniem systemu wiążącego w przypadku:

- uzupełnień kompozytowych i kompomerowych
- przygotowywanych w laboratoriach uzupełnień pośrednich (np. wkładów, koron, mostów, licówek)
- uszczelniaaczy

Korzyści

- Dokładna i wygodna aplikacja
- Oznaczenia kolorowe dla łatwości identyfikacji
- Dostępne w różnych stężeniach kwasu i konsystencjach, do użycia w zależności od przypadku



OPAKOWANIA UZUPEŁNIAJĄCE

Gluma Etch 20 Żel

Zawartość

Strzykawki 2 x 2.5 ml
25 kaniuli

Art. nr: 6600 0131

Gluma Etch 35 Płyn

Zawartość

Butelka 1 x 15 ml

Art. nr: 6600 0129

Gluma Etch 35 Żel

Zawartość

Strzykawki 2 x 2.5 ml
25 kaniuli

Art. nr: 6600 0130

GLUMA® DESENSITIZER – NATYCHMIASTOWA I DŁUGOTRWAŁA OCHRONA PRZED NADWRAŻLIWOŚCIĄ

Gluma Desensitizer to udowodnione rozwiązanie przeciwko nadwrażliwości pozabiegowej. GLUMA Desensitizer stosowany od ponad 10 lat został użyty w ponad 45 milionach uzupełnień na świecie w celu zmniejszenia nadwrażliwości.

Zastosowania

- Odświeżone szyjki zębowe, które nie wymagają uzupełnień
- Zapobieganie nadwrażliwości pozabiegowej w przypadku opracowywania zęba

Korzyści

- Pierwszym efektem jest natychmiastowe zmniejszenie bólu
- Wysoka skuteczność w przypadku prawidłowej aplikacji
- Skuteczność lepsza niż w przypadku samego fluorkowania
- Dobre rezultaty nawet w połączeniu z materiałami wiążącymi
- Działa we wnętrzu zębiny, nie tworzy powłoki – przydatny również do uzupełnień pośrednich
- 12 miesięcy badań klinicznych udowodniły skuteczność tego środka znieczulającego
- Nie jest wymagane utwardzanie światłem

OPAKOWANIA UZUPEŁNIAJĄCE

Gluma Desensitizer

Zawartość

Butelka 1 x 5 ml

Art. nr:

6600 3764



STRZYKAWKI

→ strona 60

- SOPIRA Ject
- SOPIRA Ject Vario
- SOPIRA Citoject
- SOPIRA Carpule Aspirating
- SOPIRA Carpule Non-Aspirating

IGŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

→ strona 65

- SOPIRA CARPULE NEEDLES
-



SOPIRA® JECT / SOPIRA® JECT VARIO – INNOWACYJNA FORMUŁA, KTÓRA DOPASOWUJE SIĘ DO POTRZEB

Nasze rozwiązanie na wygodne znieczulenie przewodowe i nasiękowe.


SOPIRA Ject wspiera łączy ergonomię z atrakcyjnym wyglądem. To technologia posiadająca własną osobowość.

Zastosowania

- Znieczulenie nasiękowe
- Znieczulenie przewodowe

Korzyści

- Ergonomiczny kształt
- Wygodna obsługa
- Aplikacja ręczna lub samoczynna
- Większe bezpieczeństwo dzięki trzem zwiężającym się zaczepom ssącym

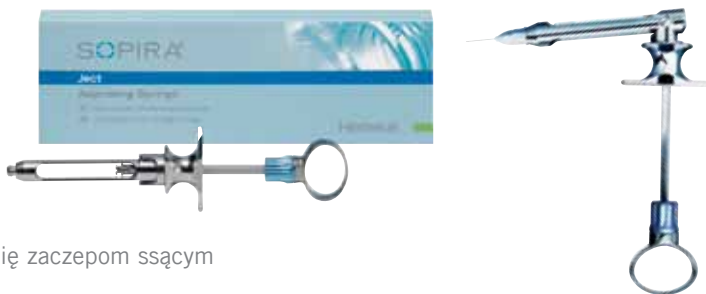

SOPIRA JECT

SOPIRA Ject

Zawartość

Strzykawkę do znieczuleń
nasiękowych i przewodowych

Art. nr: 6604 0331



SOPIRA JECT VARIO

SOPIRA Ject Vario

Zawartość

Strzykawkę do znieczuleń
nasiękowych i przewodowych
Ściągany uchwyt do nabojęw

Art. nr: 6604 0332



SOPIRA Ject Vario Cartridge Holder

Zawartość

3 uchwyty do nabojęw
SOPIRA Ject Vario

Art. nr: 6604 0333



Heraeus

SOPIRA® CITOJECT®

SOPIRA® CARPULE®

SOPIRA® JECT

Śpij spokojnie,
to była dobra decyzja



Kompletna gama produktów SOPIRA.

Precyzja, funkcjonalność i niezawodność – ustanawiamy wysokie normy dla naszych strzykawek dentystycznych. Cała wiedza i doświadczenie Heraeus są przelewane na nasze rozwiązania, aby zapewnić bardziej indywidualną opiekę, obecnie i w przyszłości.

SOPIRA to wszechstronne rozwiązanie do znieczuleń miejscowych. Gama produktów SOPIRA to system, na którym można zawsze polegać, ponieważ łączy on w sobie wiele lat doświadczeń z ciągłym rozwojem. Wystarczy usiąść i się zrelaksować.

SOPIRA®
Znieczulenia miejscowe

SOPIRA® CITOJECT® — MIŁO JEST OFEROWAĆ OPTYMALNĄ OPIEKĘ

Wygląd i precyzja nigdy nie były tak wspaniałe. Dostępne są strzykawki ze stali nierdzewnej i lekkiego stopu.

SOPIRA Citoject przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności znieczuleń śródwładłowych. Mniejszy dyskomfort dla pacjentów i mniej stresująca atmosfera pracy dla dentysty.

Zastosowania

- Znieczulenia miejscowe wybranych zębów
- Lokalizacja bólu
- Znieczulenia miejscowe u pacjentów z problemami sercowo-naczyniowymi
- Znieczulenia miejscowe u dzieci

Korzyści

- Minimalny czas oczekiwania pomiędzy zastrzykiem a leczeniem
- Wymagana mniejsza ilość środka znieczulającego – łagodniejsze działanie na serce i układ krążenia
- Ograniczone drętwienie
- Przydatny również w przypadku pacjentów zagrożonych
- Przeznaczony do wszystkich dostępnych rodzajów nabojów



ASORTYMENT Z LEKKIEGO STOPU

SOPIRA Citoject Set – Pointed Plunger (tłok szpiczasty)

Zawartość	Art. nr:
1 zestaw strzykawek SOPIRA Citoject 1.8 ml/system metryczny	6542 9094

SOPIRA Citoject Set – Flat Plunger (tłok płaski)

Zawartość	Art. nr:
zestaw strzykawek SOPIRA Citoject 1.8 ml/system metryczny	6600 5326
1 zestaw strzykawek SOPIRA Citoject 1.8 ml/ system calowy	6600 2392
1 zestaw strzykawek SOPIRA Citoject 2.2 ml/ system calowy	6600 2395



ASORTYMENT ZE STALI NIERDZEWNEJ

SOPIRA Citoject Set – Pointed Plunger (tłok szpiczasty)

Zawartość	Art. nr:
1 zestaw strzykawek SOPIRA Citoject 1.8 ml/system metryczny	6600 9001



INNE

Tłoki

Zawartość	Art. nr:
1.8 ml Tłok szpiczasty	6603 8610
1.8 ml Tłok płaski	6603 8672
2.2 ml Tłok płaski	6603 8673

Tulejki plastikowe

Zawartość	Art. nr:
1.8 ml Tulejka plastikowa	6600 5419
2.2 ml Tulejka plastikowa	6600 6866

AKCESORIA ZE STALI NIERDZEWNEJ

Zbiorniczek

Zawartość	Art. nr:
Zbiorniczek kolankowy 1.8 ml/system metryczny	6600 9002

AKCESORIA Z LEKKIEGO STOPU

Zbiorniczek

Zawartość	Art. nr:
Zbiorniczek kolankowy 1.8 ml/system metryczny	6542 9051
Zbiorniczek kolankowy 1.8 ml/system calowy	6600 2394
Zbiorniczek prosty 1.8 ml/ system metryczny	6542 9108
Zbiorniczek prosty 1.8 ml/ system calowy	6600 2393
Zbiorniczek kolankowy 2.2 ml/system calowy	6600 2397
Zbiorniczek prosty 2.2 ml/ system calowy	6600 2396

SOPIRA® CARPULE ASPIRATING – SOPIRA® CARPULE NON-ASPIRATING – PEWNE WKŁUCIE ZA KAŻDYM RAZEM

Strzykawka SOPIRA Carpule to elastyczna baza do wszystkich zastosowań i przypadków. Solidna i niezawodna. Bezpieczna i wygodna. Można liczyć na stabilność obu modeli – strzykawki zasysającej i niezasysającej.

Zastosowania

SOPIRA Carpule Non-Aspirating

- Nakładanie materiałów o konsystencji pasty w leczeniu ozębnej, endodoncji i stomatologii zachowawczej

Korzyści

SOPIRA Carpule Non-Aspirating

- Łatwa w obsłudze
- Solidna, funkcjonalna i bezpieczna

SOPIRA Carpule Aspirating

- Znieczulenie nasięgowe
- Znieczulenie przewodowe

SOPIRA Carpule Aspirating

- Łatwa w obsłudze
- Solidna, funkcjonalna i bezpieczna
- Zoptymalizowane zasysanie dzięki zapadce dwupierścieniowej



SOPIRA CARPULE NON-ASPIRATING

Zawartość	
1.8 ml/system metryczny	
Art. nr:	6511 1760

SOPIRA CARPULE ASPIRATING

Zawartość	
1.8 ml/system metryczny	
Art. nr:	6534 7466

Zawartość	
1.8 ml/system calowy	
Art. nr:	6600 2422

SOPIRA® CARPULE IGŁY – DOŚWIADCZ ŁATWOŚCI DELIKATNEGO WKŁUCIA

Nasze igły przyjazne dla tkanki zostały wycięte z pierwszorzędnej stali w innowacyjny sposób. Rozwiązanie to spełnia wymogi szerokiego zakresu znieczuleń dentystycznych i jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi strzykawkami dentystycznymi.

Zastosowanie

- Wszystkie rodzaje znieczuleń miejscowych w dentystyce

Korzyści

- Mniejszy ból w momencie wkłucia dzięki trójściennej końcówce igły
- Powłoka silikonowa zapewnia optymalną penetrację tkanki
- Bezpieczna obsługa dzięki dużej elastyczności

Kolory kielichów zgodne z ISO 7885

Ø 0.3 mm żółta

Ø 0.4 mm szara



Igły SOPIRA Carpule/ system metryczny

Art. nr:		Ø (G)	Długość mm 08 12 16 21 25 30 35 38
6601 4421	SOPIRA Carpule Needles Regio Metric	30 G	12 mm
6601 4410	SOPIRA Carpule Needles Regio Metric	30 G	16 mm
6601 4409	SOPIRA Carpule Needles Regio Metric	30 G	21 mm
6601 5583	SOPIRA Carpule Needles Regio Metric	30 G	25 mm
6601 4407	SOPIRA Carpule Needles Regio Metric	27 G	25 mm
6601 4408	SOPIRA Carpule Needles Regio Metric	27 G	38 mm

Igły SOPIRA Carpule/ system calowy

6601 4426	SOPIRA Carpule Needles Regio Inch	30 G	12 mm
6601 4425	SOPIRA Carpule Needles Regio Inch	30 G	16 mm
6601 4424	SOPIRA Carpule Needles Regio Inch	30 G	21 mm
6602 0505	SOPIRA Carpule Needles Regio Inch	27 G	38 mm

FILMY RENTGENOWSKIE DO ZDJĘĆ WEWNĄTRZYSTNYCH

→ strony 68

— Afga Dentus M2 Comfort

FILMY RENTGENOWSKIE DO ZDJĘĆ ZEWNĄTRZYSTNYCH

→ strony 70

— Afga Dentus Ortholux

— Afga Dentus RP6

— Afga Dentus Duplicating

AKCESORIA

→ strony 72

— Afga Dentus Film kasety i ekrany wzmacniające

— Afga Dentus X-ray środki chemiczne



AGFA DENTUS® M2 COMFORT – NIE TYLKO BEZPIECZNE, LECZ RÓWNIEŻ WYGODNE

Agfa Dentus M2 Comfort to wyjątkowo czuły film do wykonywania zdjęć w jamie ustnej, umieszczony w miękkim opakowaniu. Film ten charakteryzuje się wyjątkowo dobrą jakością obrazu i bardzo niskim zapotrzebowaniem na promieniowanie. Agfa Dentus M2 Comfort jest kompatybilny ze wszystkimi stosowanymi aparatami rentgenowskimi. Można go wywoływać fotochemicznie we wszystkich standardowych rentgenowskich środkach chemicznych, ręcznie lub maszynowo. Przy przejściu na M2 Comfort nie jest wymagany dodatkowy test akceptacyjny (zgodnie z rozporządzeniami w sprawie zdjęć rentgenowskich). Filmy Agfa Dentus D, E i E/F są nie tylko bezpieczne, lecz również wygodne dla pacjentów ze względu na wyjątkowo miękkie opakowanie.

Zastosowania

- Uniwersalny film do zdjęć wewnątrzustnych
- Do wywoływania ręcznego i maszynowego

Korzyści

- Łatwa diagnoza dzięki wysokiemu kontrastowi oraz wysokiej gęstości maksymalnej (dobrze widzialne stopnie szarości)
- Eliminacja możliwości poruszenia zdjęcia dzięki krótkiemu czasowi naświetlania
- Miękkie opakowanie z filmem o zaokrąglonych brzegach
- Bardzo miękki plastik, odporny na działanie śliny, łatwy do zdezynfekowania
- Opakowanie właściwe gwarantuje bezpieczeństwo obsługi również w ciemni
- Uniwersalne wywoływanie
- Długi okres przechowywania: gwarancja archiwizacji do 30 lat
- Niewielkie zamglenie



FILM E/F-SPEED X-RAY**3 x 4 cm, Pojedynczy film****Zawartość**

150 x 1 arkusz

Art. nr:**6541 4615****FILM E/F-SPEED X-RAY****3 x 4 cm, Podwójny film****Zawartość**

150 x 2 arkusz

Art. nr:**6541 4623****FILM E/F-SPEED X-RAY****5 x 7 cm, Pojedynczy film****Zawartość**

25 x 1 arkusz

Art. nr:**6587 0955****2 x 3 cm, Pojedynczy film****Zawartość**

100 x 1 arkusz

Art. nr:**6503 1124****2 x 3 cm, Podwójny film****Zawartość**

100 x 2 arkusz

Art. nr:**6503 1256****FILM D-SPEED X-RAY****3 x 4 cm, Pojedynczy film****Zawartość**

150 x 1 arkusz

Art. nr:**6600 9817****FILM D-SPEED X-RAY****3 x 4 cm, Podwójny film****Zawartość**

150 x 2 arkusz

Art. nr:**6600 9818****FILM E-SPEED X-RAY****3 x 4 cm, Pojedynczy film****Zawartość**

150 x 1 arkusz

Art. nr:**6603 5581****2 x 3 cm, Pojedynczy film****Zawartość**

100 x 1 arkusz

Art. nr:**6600 9814****2 x 3 cm, Podwójny film****Zawartość**

100 x 2 arkusz

Art. nr:**6600 9815**

AGFA DENTUS® ORTHOLUX/RP6/ DUPLICATING – DO NAJWYŻSZYCH WYMOGÓW DIAGNOSTYCZNYCH

Agfa Dentus Ortholux jest ortochromatycznym (wrażliwym na światło zielone) filmem do zdjęć zewnątrzustnych. Umożliwia on odzwierciedlenie największej jasności i dokładności szczegółu. Można go łączyć ze wszystkimi dostępnymi na rynku ekranami wzmacniającymi wrażliwymi na światło zielone, np. Agfa Dentus Ortho. Dzięki nowoczesnej technologii kryształów i emulsji, Agfa Dentus Ortholux gwarantuje wspaniałą jakość obrazu przy niskiej dawce promieniowania.

Agfa Dentus RP6 jest filmem wrażliwym na promienie ultrafioletowe/światło niebieskie. Dzięki największej wrażliwości filmu przy zmniejszonej dawce promieniowania można go łączyć ze wszystkimi dostępnymi na rynku ekranami wzmacniającymi emitującymi światło niebieskie oraz ultrafioletowe/niebieskie, np. Agfa Dentus Blue. Większy kontrast i wymagana niższa dawka promieniowania powodują, że Agfa Dentus RP6 jest powszechnie stosowany jako standardowy film.

Agfa Dentus Duplicating to film do kopiowania filmów rentgenowskich o wyrównanej wartości tonowej.

Zastosowania

- Zdjęcia panoramiczne
- Kraniometria
- Badanie stawów skroniowo-żuchwowych
- Technika wycięcia połowy żuchwy

Korzyści

Agfa Dentus Ortholux

- Wyjątkowa ostrość
- Najlepsze odtworzenie szczegółów
- Jaskrawe obrazy ze względu na szczególnie wyraźną warstwę niebieską i duży kontrast
- Obraz o małej wielkości ziarna do stworzenia jednolitego obrazu ogólnego
- Wyjątkowo niewielkie zamglenie i duża stabilność w trakcie przechowywania
- Wyraźna stabilność przy obróbce

Agfa Dentus RP6

- Wyraźna stabilność przy obróbce
- Duża ostrość
- Dobre odtworzenie szczegółów

Agfa Dentus Duplicating

- Wyjątkowo duża przejrzystość kopiowania
- Optymalny kontrast
- Reprodukowanie z dużą precyzją
- Wrażliwość na promieniowanie ultrafioletowe i światło białe
- Do obróbki w ogólnie dostępnych urządzeniach



ORTHOLUX

12.7 x 30.5 cm

Zawartość

100 arkusz

Art. nr: 6600 0311

15 x 30 cm

Zawartość

100 arkusz

Art. nr: 6600 0312

18 x 24 cm

Zawartość

100 arkusz

Art. nr: 6600 0313

8 x 10 cal

Zawartość

100 arkusz

Art. nr: 6600 0314



15 x 30 cm

Zawartość

100 arkuszy składanych do archiwizacji

Art. nr: 6600 2380



RP6

12.7 x 30.5 cm

Zawartość

100 arkusz

Art. nr: 6578 0689

15 x 30 cm

Zawartość

100 arkusz

Art. nr: 6578 0697

18 x 24 cm

Zawartość

100 arkusz

Art. nr: 6578 0700



DUPLICATING

12.7 x 30.5 cm

Zawartość

100 arkusz

Art. nr: 6503 8641

15 x 30 cm

Zawartość

100 arkusz

Art. nr: 6503 8668



AGFA DENTUS® FILM KASETY I EKRANY WZMACNIAJĄCE – ŁATWE W UŻYCIU, WIARYGODNA DIAGNOSTYKA

Kasety Agfa film posiadają opatentowany system magnetycznego zabezpieczenia przed naciskiem, co zapewnia wytrzymałość i jednolity styk filmu/folii. Dzięki temu gwarantowana jest największa ostrość obrazu. Bardzo niski poziom absorpcji promieniowania przez zastosowany plastik zapewnia ograniczenie do minimum narażenia pacjenta na promieniowanie. Specjalna powłoka ochronna ekranów wzmacniających prowadzi do istotnego ograniczenia promieniowania rozproszonego oraz jeszcze ostrzejszych zdjęć.

Korzyści

- Opatentowany system magnetycznego zabezpieczenia przed naciskiem pomiędzy folią a filmem
- Wbudowany wziernik pokazuje, czy w kasecie znajduje się film
- Długa żywotność dzięki zastosowaniu niewrażliwej, odpornej na uderzenie i zarysowanie obudowy plastikowej
- Wymiary zgodne z wymogami norm (15 x 30 cm)



KASETY AGFA DENTUS ORTHOLUX FILM

MEDIUM 200

8 x 10 cal

Zawartość

wrażliwy na światło zielone,
klasa 200, Ekran wzmacniający

Art. nr: 6600 9653

REGULAR 400

15 x 30 cm

Zawartość

wrażliwy na światło zielone,
klasa 400, Ekran wzmacniający

Art. nr: 6600 2011

18 x 24 cm

Zawartość

wrażliwy na światło zielone,
klasa 400, Ekran wzmacniający

Art. nr: 6600 2013

8 x 10 cal

Zawartość

wrażliwy na światło zielone,
klasa 400, Ekran wzmacniający

Art. nr: 6600 2014

EKRANY WZMACNIAJĄCE AGFA DENTUS BLUE

BLUE 200

12.7 x 30.5 cm

Zawartość

emisja światła niebieskiego, klasa 200

Art. nr: 6529 9212

15 x 30 cm

Zawartość

emisja światła niebieskiego, klasa 200

Art. nr: 6529 9220

18 x 24 inch

Zawartość

emisja światła niebieskiego, klasa 200

Art. nr: 6529 9239

BLUE 400

12.7 x 30.5 cm

Zawartość

emisja światła niebieskiego, klasa 400

Art. nr: 6529 9166

15 x 30 cm

Zawartość

emisja światła niebieskiego, klasa 400

Art. nr: 6529 9174

EKRANY WZMACNIAJĄCE AGFA DENTUS ORTHO

MEDIUM 200

15 x 30 cm

Zawartość

emisja światła zielonego, klasa 200

Art. nr: 6576 9898

18 x 24 cm

Zawartość

emisja światła zielonego, klasa 200

Art. nr: 6576 9871

REGULAR 400

12.7 x 30.5 cm

Zawartość

emisja światła zielonego, klasa 400

Art. nr: 6576 9855

15 x 30 cm

Zawartość

emisja światła zielonego, klasa 400

Art. nr: 6576 9847

18 x 24 cm

Zawartość

emisja światła zielonego, klasa 400

Art. nr: 6576 9839

8 x 10 cal

Zawartość

emisja światła zielonego, klasa 400

Art. nr: 6503 8129

AGFA DENTUS® /X-RAY CHEMICALS – OPTYMALNA OBRÓBKA CHEMICZNA

Połączenie wywoływacza i utrwalacza Agfa Dentus zapewnia obrazy wysokiej jakości do zdjęć wewnątrz i zewnątrzustnych.

Zastosowanie

- Ręczna obróbka oraz maszyny z naczynia ręcznego

Korzyści

- Oznaczenie wywoływacza i utrwalacza różnymi kolorami
- Wskaźnik dozowania na butelkę jednolitrową
- Wolne od aldehydu glutarowego
- Łatwe przygotowywanie roztworu do optymalnej obróbki
- Ujednolicone wielkości opakowań (1 litr i 125 ml)
- W pełni odzyskiwalny pojemnik polietylenowy



WYWOŁYWACZ

Agfa Dentus D Developer Concentrate

Zawartość

10 x 125 ml
10 jednostek = 10 x 500 ml roztwór do wywoływania w naczyniu

Art. nr: 6569 4510

Agfa Dentus D-1000 Developer Concentrate

Zawartość

1.000 ml
1 litr = 5.500 ml roztwór do wywoływania w zbiorniku

Art. nr: 6528 2194

UTRWALACZ

Agfa Dentus F Concentrate Fixer

Zawartość

10 x 125 ml utrwalacz
10 jednostek = 10 x 500 ml roztwór do utrwalania w naczyniu

Art. nr: 6569 4502

Agfa Dentus F-1000 Fixer Concentrate

Zawartość

1.000 ml
1 litr = 5.500 ml roztwór do utrwalania w zbiorniku

Art. nr: 6528 2259

MINI-CIEMNIA

Mini-ciemnia

Zawartość

Do ręcznego wywoływania klisz zdjęć rentgenowskich wykonanych wewnątrz jamy ustnej środkami chemicznymi Agfa Dentus D&F, bez ciemni i bez podłączeń elektrycznych w gabinecie dentystycznym.


Art. nr: 6601 0083



MATERIAŁY DO PRAC TYMCZASOWYCH

→ strona 78

- PreVISION CB
 - PreVISION CEM
 - Dentalon plus
-

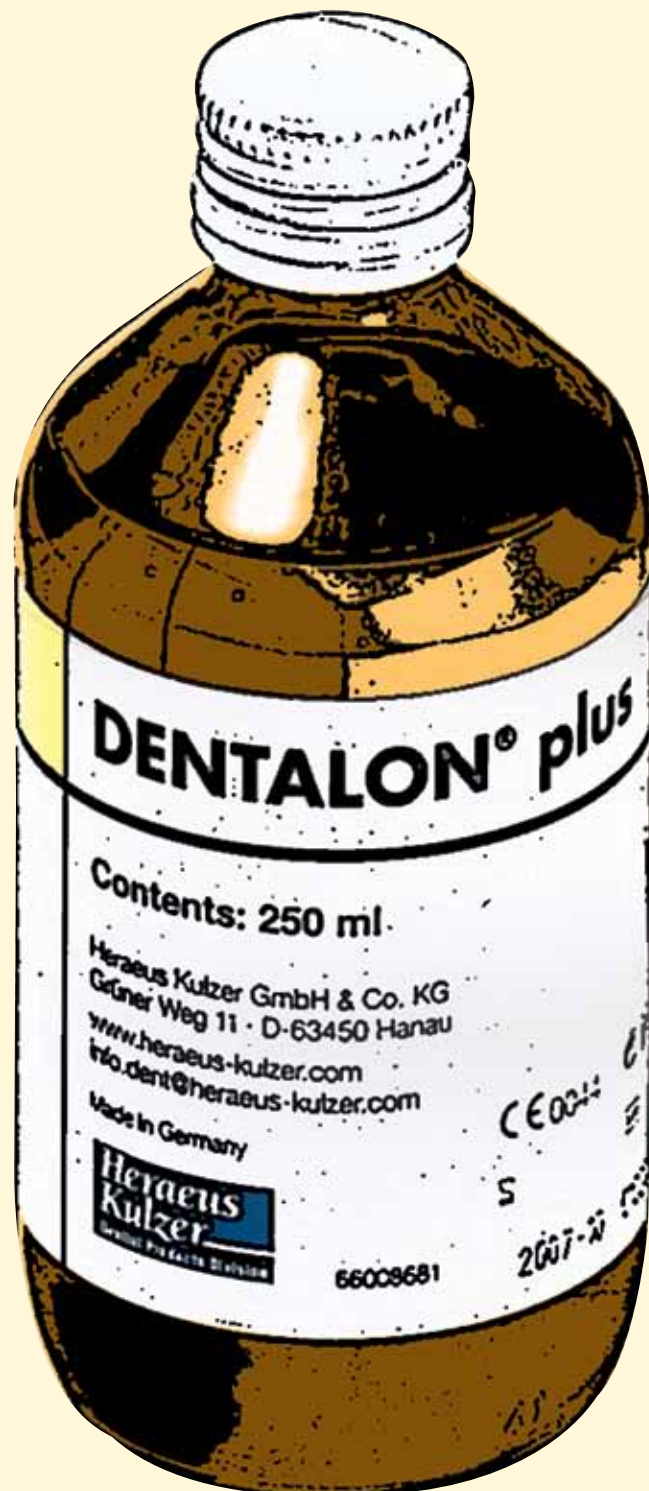

DENTALON® plus

Contents: 250 ml

Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG
Gefner Weg 11 · D-63450 Hanau
www.heraeus-kulzer.com
info.dent@heraeus-kulzer.com

Made in Germany



66009681

CE 0044

S

2007-2

PREVISION® CB/PREVISION® CEM – ŁATWE ROZWIĄZANIA DO PRAC TYMCZASOWYCH

PreVISION CB to samoutwardzalny, dwukomponentowy materiał do opracowywania tymczasowych koron i mostów. Jego duża wytrzymałość i stabilność kolorystyczna powoduje, że opracowania tymczasowe są bezpieczne, funkcjonalne i przekonujące z kosmetycznego punktu widzenia. System naboji 4:1 zapewnia łatwy proces przetwarzania i precyzyjne dozowanie.

PreVISION CEM to tymczasowy, gotowy do użycia cement uszczelniający do tymczasowych koron i mostów oraz do tymczasowego cementowania uzupełnień ostatecznych.

Zastosowania

PreVISION CB

- Przygotowywanie tymczasowych koron i mostów

Korzyści

PreVISION CB

- Niezawodne, kosmetycznie i funkcjonalnie przekonujące rezultaty gwarantują bezproblemowe przejście okresu ciąży
- Prosta obsługa
- Stałe właściwości materiału i opracowywania dzięki automatycznemu dozowaniu
- Ochrona miazgi dzięki niskiej temperaturze polimeryzacji
- Bardzo dobra stabilność i wytrzymałość
- Wysoka stabilność kolorystyczna dzięki systemowi katalizatora bez dodatku aminy

PreVISION CEM

- Cementowanie tymczasowych koron i mostów
- Tymczasowe cementowanie uzupełnień ostatecznych

PreVISION CEM

- Stosowany do cementowania tymczasowych koron i mostów z metalu, ceramiki i kompozytu
- Tymczasowe cementowanie uzupełnień ostatecznych
- Bez dodatku eugenolu



PREVISION CB

Kolor A1

Zawartość

1 x 76 g PreVision CB nabój,
15 niebieskich końcówek
mieszających

Art. nr: 6600 1536

Kolor A2

Zawartość

1 x 76 g PreVision CB nabój,
15 niebieskich końcówek
mieszających

Art. nr: 6600 1537

Kolor A3.5

Zawartość

1 x 76 g PreVision CB nabój,
15 niebieskich końcówek
mieszających

Art. nr: 6600 1538



AKCESORIA

Pistolet dozujący

Zawartość

Pistolet dozujący do systemu nabojów
PreVision CB

Art. nr: 6600 0781

Prevision CB Końcówki mieszające

Zawartość

45 niebieskich końcówek
mieszających (4:1)

Art. nr: 6600 1553

PREVISION CEM

Tuba

Zawartość

1 x 37 g, tubka

Art. nr: 6600 1540



DENTALON® PLUS –

SPRAWDZONE MATERIAŁY DO PRAC TYMCZASOWYCH O DŁUGIEJ TRADYCJI

Dentalon plus to sprawdzony, samoutwardzalny materiał akrylowy o długiej tradycji do wykonywania tymczasowych koron i mostów metodą bezpośrednią. Jest on dostępny w trzech kolorach, które pozwalają na indywidualne dostosowanie koloru.

Zastosowanie

- Wykonywanie tymczasowych koron i mostów

Korzyści

- Wysoki połysk
- Duża stabilność mechaniczna
- Możliwe indywidualne dostosowanie koloru
- Duża stabilność kolorystyczna dzięki systemowi katalizatora bez dodatku aminy



ASORTYMENT

Dentalon Plus

Zawartość

1 x 45 ml płyn
2 x 20 g proszek w kolorach: L, M, D
pipeta do mieszania,
miseczka do mieszania

Art. nr: 6504 1200

DENTALON PLUS

Płyn

Zawartość

1 x 45 ml butelka

Art. nr: 6504 1146

Płyn

Zawartość

1 x 250 ml butelka

Art. nr: 6504 1138

DENTALON PLUS

Proszek L (jasny)

Zawartość

1 x 20 g proszek

Art. nr: 6504 1103

Proszek L (jasny)

Zawartość

1 x 100 g proszek

Art. nr: 6504 1065

Proszek M (średni)

Zawartość

1 x 20 g proszek

Art. nr: 6504 1111

Proszek M (średni)

Zawartość

1 x 100 g proszek

Art. nr: 6504 1073

Proszek D (ciemny)

Zawartość

1 x 20 g proszek

Art. nr: 6504 1081

Proszek D (ciemny)

Zawartość

1 x 100 g proszek

Art. nr: 6504 1057

CEMENTY

— iCem Self Adhesive

→ strona 84



iCEM® SELF ADHESIVE – CEMENT KOMPOZYTOWY NAJPROSTSZY SPOSÓB CEMENTOWANIA

iCEM Self Adhesive to najnowszy produkt Heraeus. Jest to wszechstronny, żywiczny cement uszczelniający, który łączy niezawodną siłę wiązania z szybką, prostą i wygodną aplikacją oraz zmniejszonym ryzykiem nadwrażliwości pozabiegowej.

Wiele badań naukowych udowodniło, że nowatorska formuła iCEM Self Adhesive łączy w sobie korzyści klasycznych cementów, takie jak łatwość opracowywania i tolerancja wilgotnego podłoża zęba, z wysokiej jakości właściwościami mechanicznymi i estetycznymi żywicznych cementów uszczelniających.

Zastosowania

- Cementowanie koron i mostów metalowych, metalowo-ceramicznych i ceramicznych
- Cementowanie wkładów metalowych, ceramicznych i kompozytowych
- Cementowanie nakładów metalowych, ceramicznych i kompozytowych
- Cementowanie sztyftów koronowo-korzeniowych z metalu, tytanu i włókna szklanego
- Utrzymywanie materiałów nylonowych do szynowania rozchwianych zębów

Korzyści

- Niezawodna siła wiązania pozwalająca uzyskać wytrzymałe uzupełnienia
- Sprawdzony w wielu badaniach naukowych na świecie
- Zapobiega nadwrażliwości pozabiegowej



iCEM SELF ADHESIVE

Uzupełnienia do strzykawek

Zawartość

1 strzykawka Automix x 5 ml (7 g)
15 końcówek mieszających
Karta obrazkowa

Art. nr: 6603 6084

Pakiet strzykawek Value Pack

Zawartość

3 strzykawki Automix x 5 ml (7 g)
45 końcówek mieszających
Karta obrazkowa

Art. nr: 6603 7633

Uzupełnienie końcówek mieszających

Zawartość

50 końcówek mieszających

Art. nr: 6603 6085



Heraeus

Najprostszy sposób cementowania –
prosto iNTELIGENTNY. Nowy iCEM® Self Adhesive.

iCEM® Self Adhesive

Samolącący cement kompozytowy

– **cement najnowszej generacji**

- Bardzo dobra siła wiązania dla uzyskania wytrzymałych uzupełnień
- Sprawdzony w wielu badaniach naukowych na całym świecie
- Zmniejsza nadwrażliwość pozabiegową
- Cement stosuje się jednoetapowo
- szybkość i wygoda w pracy

www.heraeus-dental.pl

i | CEM®

Łatwiejszy sposób
cementowania



A

Activator Universal Plus	21, 23
Agfa Dentus Duplicating	71
Agfa Dentus Blue	73
Agfa Dentus Ekrany wzmacniające	72
Agfa Dentus M2 Comfort	69
Agfa Dentus Ortholux	71, 73
Agfa Dentus Ortho Medium, Regular	73
Agfa Dentus RP6	71
Agfa Dentus X-ray Chemicals	74
Agfa Dentus D wywołувacz	75
Agfa Dentus F utrwalacz	75
Akcesoria	19, 30-31, 46, 72
Akcesoria do znieczuleń	58
Alginatowe masy wyciskowe	26
Alginoplast	27
A-silikony	08

C

Cementy	84
Charisma	42-43
Charisma Flow	41
Charisma Diamond	34-35
Charisma Opal	36-37
Charisma Opal Flow	38-39
C-silikony	20

D

Dentalon plus	81
Durafill VS	44
Dynamix speed	18

F

Filmy rentgenowskie do zdjęć zewnątrzustnych	68
Filmy rentgenowskie do zdjęć wewnątrzustnych	70

G

GLUMA 2Bond	51
GLUMA Etch	56
GLUMA Comfort Bond	54
GLUMA Comfort Bond + Desensitizer	55
GLUMA Desensitizer	57
GLUMA Self Etch	50

I

iCem Self Adhesive	84
Igły jednorazowego użytku	65

K

Kompozyty do uzupełnień zębów przednich	44
Kompozyty do uzupełnień zębów tylnych	45
Kompozyty uniwersalne	34

M

Materiały do rejestracji zwarcia	28-29
Materiały do znoszenia nadwrażliwości	57
Materiały tymczasowe	78
Materiały rentgenowskie	66
Materiały do wypełnień	32
Materiały wyciskowe	06
Memoreg 2	29
Memosil 2	29

O

Optosil P plus	23
Optosil Comfort Putty	21

P		W	
Provil Novo Monophase	15-16	Wytrawiacze	56
Provil Novo Medium	15-16	Wywoływacz- Agfa Dentus D	75
Provil Novo Light	15-16	V	
Provil Novo Putty	16	Variotime	08
PreVISION CB	79	Variotime Dynamix Putty	09
PreVISION CEM	79	Variotime Dynamix Heavy Tray	09
R		Variotime Dynamix Monophase	09
Registration Materials	28 – 29	Variotime Heavy Tray	10
S		Variotime Monophase	10
Solitaire 2	45	Variotime Medium Flow	10
SOPIRA Carpule	64	Variotime Light Flow	10
SOPIRA Carpule igły	65	Variotime Extra Light Flow	10
SOPIRA Citoject	63	Variotime Easy Putty	10
SOPIRA Ject	60	Variotime Bite	28
SOPIRA Ject Vario	60	X	
Strzykawki	60	Xantalgin Crono	27
Systemy łączące	48	Xantalgin Select	27
T		Xantopren Comfort Medium	21
Translux Power Blue	46	Xantopren Comfort Light	21
U		Xantopren Function	24
Urządzenie mieszające	18	Xantopren H green	23
Utrwalacz- Agfa Dentus F	7	Xantopren L blue	23
		Xantopren M mucosa	25
		Xantopren VL plus	23

[illegible]

Heraeus - biuro:

ul. I Dywizji Pancernej 45, pok. 118, 43-300 Bielsko-Biała

☎ / 📠 (33) 496 35 39, ✉ info-poland@heraeus.com

Country Manager: Jarosław Bruszewski

☎ 600 047 209

✉ jaroslaw.bruszewski@heraeus.com

Konsultant firmy Heraeus:

stomatologia: lek. dent. Małgorzata Grzegorzak-Nowakowska

☎ 600 975 896, ✉ malgorzata.grzegorzak@heraeus.com

Przedstawiciele regionalni Heraeus:

Łódź, Częstochowa, Katowice, Kraków, Kielce i okolice - Konrad Kędziora ☎ +48 600 976 698, ✉ konrad.kedziora@heraeus.com

Radom, Lublin, Rzeszów i okolice - Grzegorz Welo, ☎ +48 600 976 792, ✉ grzegorz.welo@heraeus.com

Poznań, Kalisz, Sieradz, Wrocław i okolice - Piotr Kupis, ☎ +48 604 241 425, ✉ piotr.kupis@heraeus.com

Warszawa i okolice, Białystok - Monika Polak, ☎ +48 508 249 599, ✉ monika.polak@heraeus.com

WWW.HERAEUS-DENTAL.COM